

Kis innováció is hozhat nagy eredményt!


Geistlich Bio-Oss® Collagen

**50 mg – Az eredeti
Geistlich Bio-Oss®
10% kollagénnel,
új kiszerelésben!**



Pajzs a sikerhez

Az elmulasztott regeneráción alapuló prevenció következménye...

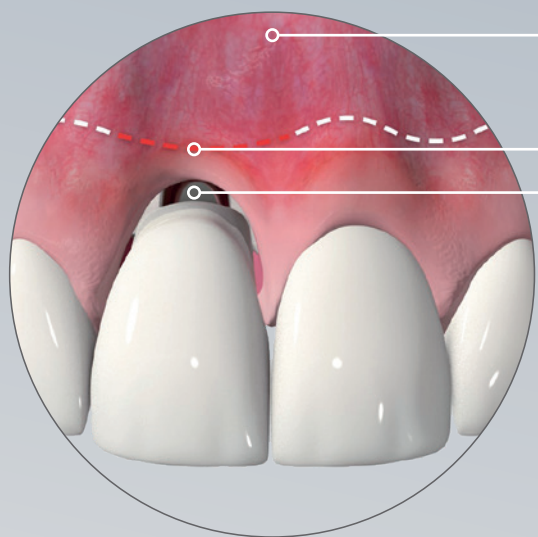


Az azonnali implantálás önmagában nem képes fenntartani az alveolus volumenét extrakciót követően.^{1,2}

A rés szabadon hagyása 2,7-szer nagyobb reszorpciót eredményez, mint a peri-implantáris rés feltöltése Geistlich Bio-Oss Collagen-nel és Geistlich Bio-Gide-dal.¹

A gerinc horizontális reszorpciója az esztétikai zónában (anterior maxilla) kifejezettebb a vékonyabb bukkális csontlemeznek köszönhetően.³


A rés feltöltése
nélkül
1 év után

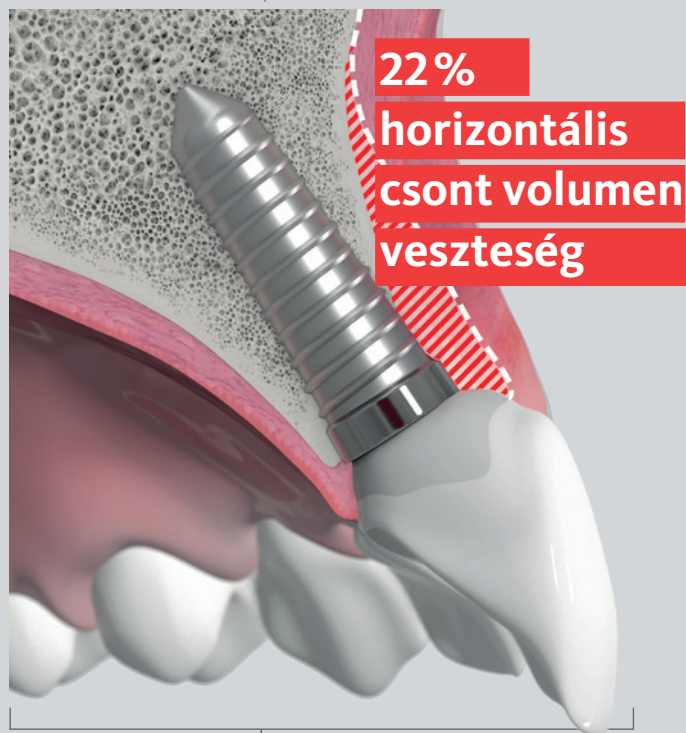

Csont reszorpció¹

- 22% horizontális csont volumen veszteség
- 1.7mm vertikális veszteség

A rés feltöltése
Geistlich Bio-Oss® Collagen-nel
1 év után

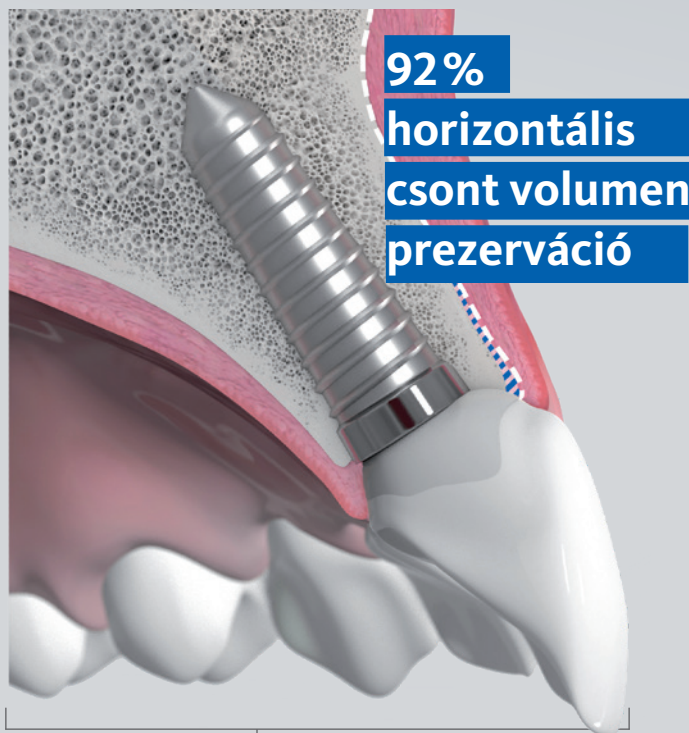


A csont volumen megőrzésének
maximalizálása¹

- 92% horizontális térfogat megőrzés
- 0.6mm vertikális veszteség

Azonnali implantálás bukkális csontfal defektus esetén

Prof. Julio C. Joly, Prof. Robert C. da Silva, Prof. Paulo F. M. de Carvalho, Dr. Víctor Clavijo | São Paulo, Brazil

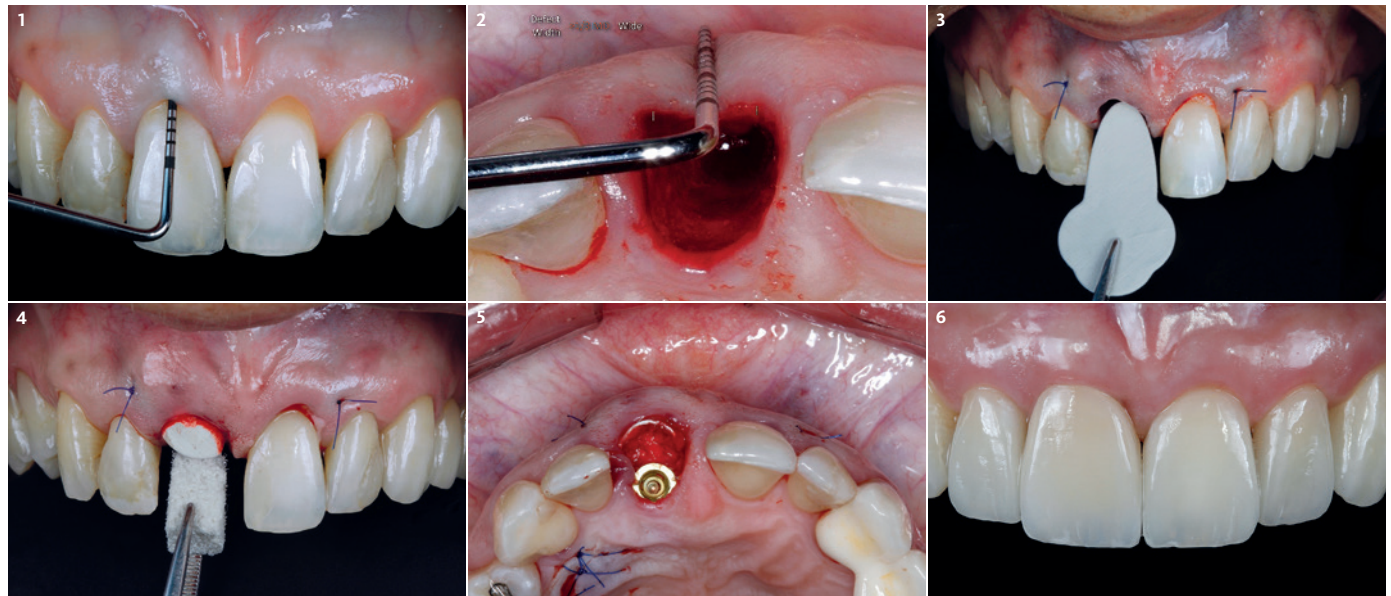

1 A kezdeti vizsgálat 9,0 mm szondázási mélységet mutat, ami gyökérfraktúrára utal. A CBCT felvétel a bukkális csontfal nagyfokú veszteségét mutatja.

2 Parodontális szondával a defektus felett óvatosan nyomva az U-alakú defektus mélysége és szélessége meghatározható.

3 Miután augmentáltuk a lágyrész vastagságát és fedtük a recessziót a 11-es és 21-es fogaknál kötőszöveti grafftal, Geistlich Bio-Gide Shape-et helyeztünk a graft és a periosteum alá.

4 Geistlich Bio-Oss® Collagen-nel feltöltjük a rést, miközben a membránnak legalább 3 mm-rel túl kell nyúlnia a defektus apikális és laterális részénél.

5 A csontpótló anyag kitölti a rést és támogatja a szöveteket, miközben fenntartja a szükséges csont volument.

6 A csontpótlás és az implantátum behelyezését követően ideiglenes korona kerül felhelyezésre, 6 hónapos gyógyulást követően ezt felváltja a végleges korona.



7 A végső restauráció crestalis képe, szép emergencia profilal, 6 hónappal az egyidejű csontpótlást és azonnali implantálást követően.

„A Geistlich Bio-Oss Collagen hatékonyan ellensúlyozhatja az extrakciót követő természetesen előforduló csontreszorpciót, amely, mint tudjuk, megakadályozhatja az esztétikus végeredményt és a stabilitás elvesztését eredményezheti a lágyrészek szintjén.”

Prof. Robert C. Da Silva



50mg – Az eredeti
Geistlich Bio-Oss®
10% kollagénnel,
új kiszerelésben!



Új kiszereelés



More details about our
distribution partners:
www.geistlich-biomaterials.com

Manufacturer

Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
6110 Wohlen, Switzerland
Phone +41 41 492 55 55
Fax +41 41 492 56 39
www.geistlich-biomaterials.com

Affiliate Australia and New Zealand

Geistlich Pharma Australia Pty Ltd.
The Zenith – Tower A
Level 21, Suite 21.01
821 Pacific Highway
NSW 2067 Chatswood, Australia
Phone +61 1800 776 326
Fax +61 1800 709 698
info@geistlich.com.au
www.geistlich.com.au

Affiliate Great Britain and Ireland

Geistlich Sons Limited
1st Floor, Thorley House
Bailey Lane
Manchester Airport
Manchester M90 4AB, Great Britain
Phone +44 161 490 2038
Fax +44 161 498 6988
info@geistlich.co.uk
www.geistlich.co.uk

Affiliate North America

Geistlich Pharma North America Inc.
202 Carnegie Center
Princeton, NJ 08540 USA
Phone +1 855 799 5500
info@geistlich-na.com
www.geistlich-na.com

Distribution Canada

HANSamed Ltd.
2830 Argentea Road
Unit 5-8
L5N 8G4 Mississauga, Canada
Phone +1 800 363 2876
Fax +1 800 863 3213
orders@hansamed.net
www.hansamed.net



Geistlich Bio-Oss® Collagen

Geistlich Bio-Oss® (small granules) + 10% collagen (porcine)
Sizes: 50 mg (2.5 × 5.0 × 7.5 mm), 100 mg (5.0 × 5.0 × 7.0 mm),
250 mg (7.0 × 7.0 × 7.0 mm), 500 mg (10.0 × 10.0 × 7.0 mm)



Geistlich Bio-Gide® Shape

Pre-shaped, bilayer collagen membrane Size: 14 × 24 mm



"A Geistlich Bio-Oss® Collagen 50mg az
ideális méretű csontpótló anyag, amely
az implantátum és a faciális csontlemez
közé helyezve fenntartja a kemény- és
lágyszövet volumenét az osseointegráció
és a gyógyulás során."

Dr. Justin Kang

- 1 Cardaropoli, D. et al. IJPRD 2014;34:631-637. (clinical study)
- 2 Vignoletti, F. & Sanz, M. Periodontology 2000 2014;66:132-152. (clinical study)
- 3 Sanz, M., et al. Clin Oral Implants Res. 2017 Aug;28(8):902-910. (clinical study)