




Rövid útmutató az Osstell SI-SQ készülékhez


Üzembe helyezés – Általános tudnivalók



Osstell ISQ modulok

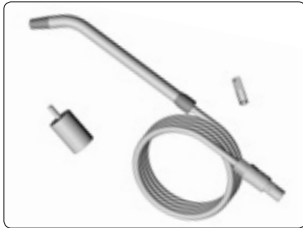


Mérőszonda és kábel,
TestPeg, SmartPeg
becsavarás-segítő

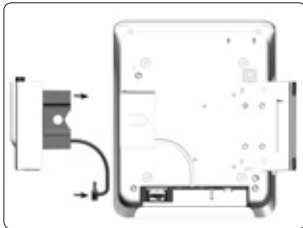

Tegye fel a az Osstell ISQ modul,
amíg az hallhatóan be nem pattan.
Ügyeljen az USB-kábel
megfelelő illesztésére!



Csatlakoztassa az USB-t.

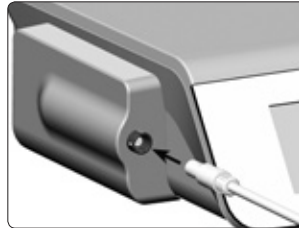


Dugja be a mérőszondát.
Ügyeljen a megfelelő
illesztésre!



Akassza be és rögzítse az
univerzális tartót.

Rövid útmutató az Osstell SI-SQ készülékhez

Mérési eredmény

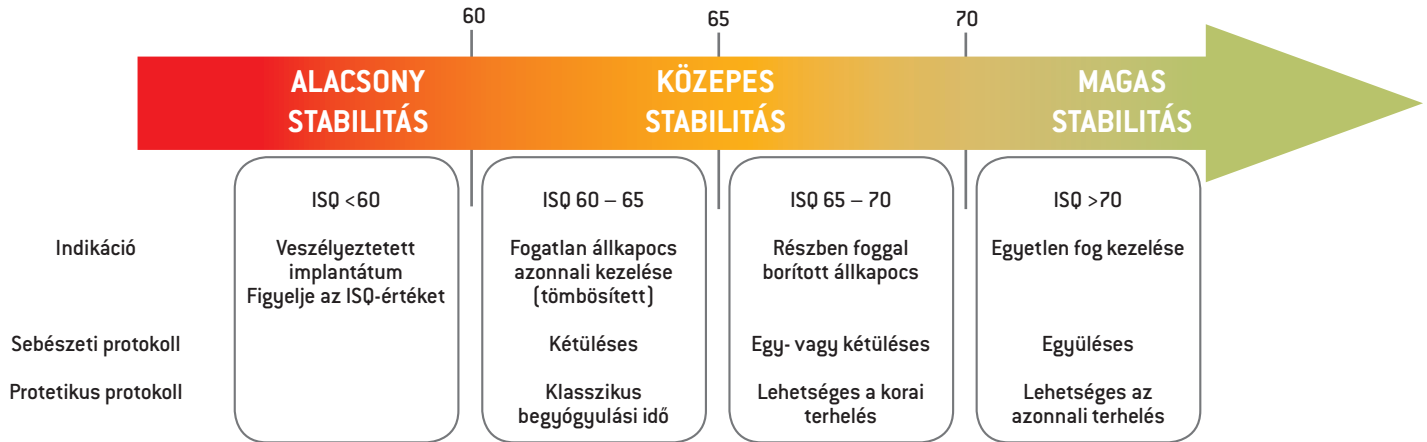

Az alábbiakban a tudományos adatok összefoglalása található, amely nem tekinthető hivatalos ajánlásként. Az osteointegráció monitorozásához végezzen mérést az implantátumok beültetése után, valamint az implantátumra a pótlás felhelyezése előtt.

Tudományos kutatások az alábbi címen olvashatók: www.osstell.com

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com



OSSTELL isQ

50916 AUN Rev. 001 / 10.11.2017
Változtatás joga fenntartva