

Composi-Tight® 3D Fusion™

Szekcionált Matrica Rendszer

Garrison

Dental Solutions

Új!



A Garrison új Composi-Tight® 3D Fusion™ szekcionált matrica rendszerét a II. osztályú kompozit restaurációk sikerebb, könnyebb kivitelezésére tervezték.

A Garrison exkluzív újdonsága:

A Soft-Face™ szilikon csúcsai a tökéletes stabilitást és egyben a rugalmas, lágy megtámasztást biztosítják. A Tru-Stack technológia segíti a gyűrű ék feletti elhelyezését, valamint az Ultra-Grip™ retenciós támasztékok kiküszöbölik a gyűrű „rugózását”, ezzel stresszmentessé teszik a tökéletes kompozit restauráció kivitelezését.

A starter kit tartalma:



1 kék gyűrű 1 narancs gyűrű 1 zöld gyűrű 80 db rugalmas ék 70 db matrica 5 méretben 1 gyűrűfogó

Composi-Tight® 3D Fusion™

Ultra Adaptív Wedge

A Soft -Face™ adaptív anyagok, a szilárd belső mag és a fejlett mechanikai jellemzők kombinálásával valóban működőképes ék jön létre.



Composi-Tight® 3D Fusion™ Ultra Adaptív Wedge

(50 extra kicsi, kicsi, közepes és nagy méret)

Speciális, halszálka típusú ékfelszín, mely rugalmas könnyű behelyezést biztosít, egyben a gyors visszarugózó képességének köszönhetően azonnali stabilitást biztosít.



Minden ellenőrzés alatt

Az univerzális markolat segítségével az ék behelyezése, bármely eszközzel elvégezhető.

Gyengéd behelyezés

A nyílszerű hegy biztosítja hogy behelyezéskor az ínypapilla és a kofferdám izoláció ne sérüljön

Tartsa tisztán (és szárazon!)

Követi a fogak kontúrjait, így tiszta és tökéletes stabilitást biztosít a fogközben.



Garrison

Dental Solutions


THE LEADER IN MATRIX SYSTEMS



Composi-Tight® 3D Fusion™

Szekcionált Matrica Rendszer

Új! Egy rendszer minden esetre

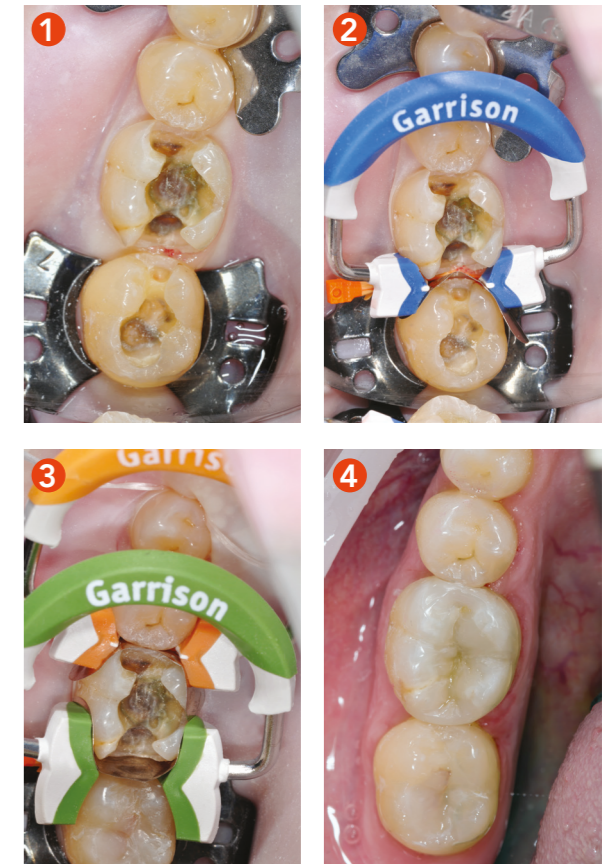

Dr. Martin von Sontagh, Austria

Tartalma:
Composi-Tight®
3D Fusion™
gyűrűk



Garrison

Dental Solutions

THE LEADER IN MATRIX SYSTEMS


Szekcionált matrica rendszer minden II. osztályú cavitáshoz.



- A zöld gyűrű széles, alkalmas nagyobb cavitás és hiányzó fogrészek ellátásakor
- A nagy szilikon pofák nem szűkítik a matrica szélességét.



- A kék gyűrű rövid, nem megfelelően elhelyezkedő fogakhoz alkalmas
- Nagy elválasztó erő, erőssége megegyezik a narancssárga gyűrűével.

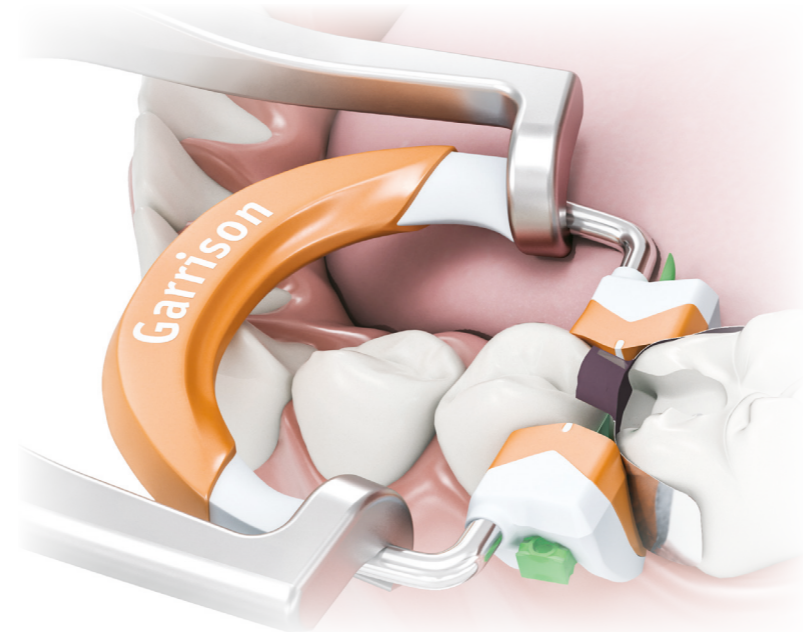

- Nagyméretű vagy nagyon domború fogakhoz
- Különösen erős, ez biztosítja a kontúr pontok kialakítását
- A magas gyűrűs fal tökéletes marginális széleket biztosít.

Lépésről lépésre a sikerhez:



1. Helyezze be a matrica szalagot



2. Helyezze az éket a megfelelő helyzetbe, majd rögzítse a matricát



3. Helyezze a kiválasztott gyűrűt a fogó segítségével, pontosan az ék fölé


Mindhárom Composi-Tight® 3DA Fusion™ gyűrű lehetővé teszi bármilyen fog esetén kockázat nélküli lecsúszásátlást. Továbbá, a Soft-Face™ szilikon párnák tovább fokozzák az ideális anatómia forma kialakítását.



Composi-Tight®
3DFusion™

Teljesen domború nem tapadó matrica

Garrison
Dental Solutions

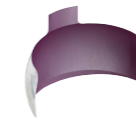

Tekerje fel- A Full Curve szalagok hajlékonyak, ívelték megkönnyítve a gyűrű felhelyezését. Lágys és 0,038 mm vékonyak, tehát tökéletes választásnak bizonyulnak.




Mélyre vagy tágabbra - továbbfejlesztett subgingiva kiterjesztések és a körbefutó hossz hozzáadása jobb eredményeket jelent.



Tartsa lenyomva a füleket- okklúziós elhelyezés. A GrabTab™ kiváló irányítást biztosít bármilyen okklúziós elhelyezésnél.



Sima, nagyon sima – 3D Fusion Full Curve matrica nem lenne teljes, a Slick Bands bevonat nélkül.

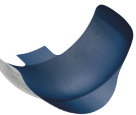

	premoláris	premoláris és mély fognyaki preparációk	premolárisok és kis molárisok	moláris	moláris és mély fognyaki preparációk
0,038 mm vastagság					
magasság	4,4 mm	6,0 mm	5,6 mm	6,6 mm	8,7 mm