



Dr. Schumacher -
Sz&T Magyarország Kft.




DR. SCHUMACHER



TELJES TERMÉKPROGRAM

*FERTŐTLENÍTÉS,
HIGIÉNYIA ÉS ÁPOLÁS*

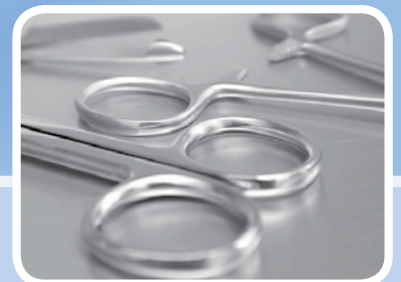

2012

Minőség és innováció a higiéniában

Több mint 30 éve törekszünk arra, hogy megvédjük az egészségügyben dolgozó személyzetet és a pácienseket a fertőzésektől és szennyezésektől.

Tapasztalatunk garantálja a biztonságot

A Dr. Schumacher céget 1978-ban Melsungenben alapították. A cég alapítója, Dr. Henning Schumacher vegyész révén azonban voltaképpen már több mint 40 éve szorosan összefonódik a higiénia és fertőtlenítés kérdéseivel.

Dr. Henning Schumacher 1968-ban kezdte meg vegyészkarrierjét egy neves hamburgi fertőtlenítő készítményeket gyártó cég kutatás-fejlesztési részlegén. Néhány évnyi sikeres kutatótevékenységet követően elfogadta egy észak-hesseni nagy német gyógyszergyártó konszern ajánlatát.

A nagy konszernnek döntési procedúrája azonban túl hosszú és bürokratikus volt számára. Hamarosan kialakult a saját vállalkozás iránti igénye, melynek segítségével innovatív termékeit saját erőből dobhatja piacra.

A 90-es évek végén vállalatát két fia, Dierk (vegyész) és Jens (gyógyszerész) örökölte, akik ettől az időponttól édesapjuk cégfilozófiáját folytatják. Az innovatív termékek kutatása és fejlesztése két fia számára is a vállalati stratégia döntő alapját képezi. A vállalat az elmúlt években így sikeresen nagy európai fertőtlenítőszer gyártóvá fejlődött.

Intenzív kutatás és fejlesztés

Konzekvens kutatással és fejlesztéssel az aldehid-mentes eszközfertőtlenítő szerek területén az egyik legfontosabb gyártóvá váltunk. A 80-as évek elején mi mutattuk be az egyik legelső rendkívül hatékony aldehid- és fenolmentes felületfertőtlenítő szert. Nem sokkal később követte ezt az első aldehid- és fenolmentes eszközfertőtlenítő szer átfogó hatékonysággal a tuberkulózis baktériumokkal szemben, mely megfelelt a DGHM irányvonalainak.

A manuális eszközfertőtlenítő szerek új generációjával egyértelmű jelet adunk: bebizonyítjuk, hogy a szigorított DGHM irányvonalak és az **aldehidek mellőzése** ellenére lehetséges **a hatóanyag-tartalmat alacsonyan, a behatási időt pedig röviden tartani!**

✓ ISO 14001 ✓ ISO 9001
✓ BS OHSAS

QAKE



INDUSTRIEVERBAND
HYGIENE UND
OBERFLÄCHENSCHUTZ **IHO**

DGSV
Deutsche Gesellschaft für
Sterilgutversorgung e.V.



Konzekvens minőségpolitika

Célunk, hogy olyan termékeket kínáljunk, melyeket a legújabb technológiai ismeretek és eljárások birtokában gyártunk, hogy lehetővé tegyük a legmagasabb fokú felhasználó-barátságot és biztonságot. Gyógyszerek, orvosi készítmények, biocidok és kozmetikumok gyártójaként a GMP, ISO 9001/EN 13485, valamint a kozmetikai GMP irányvonalaknak megfelelően dolgozunk. Gyártási eljárásainkat neves gyártók auditálták és hitelesítették.

Kompetens tanácsadás és szerviz

Az innovatív termékeknél azonban többet kínálunk – számunkra a kompetens tanácsadás és szerviz minden, a higiénia és fertőtlenítés témakörét érintő területen magától értetődő.

Termékeink kezelésében és a higiéniai előírások teljesítésében tanácsadóként állunk Ön mellett. Minden törvényileg előírt termékdokumentációkat folyamatosan aktualizáljuk. Internetes oldalunkon, a www.schumacher-online.com címen ezek bármikor elérhetőek.

Kompetens, speciális képzésben részesült külső képviselői csapatunk mindenkor rendelkezésére áll oktatáshoz, illetve felhasználói és higiéniai-jogi problémák helyi megoldásában.

A kutatói, tudományos, valamint jogi részlegeinkkel való szoros együttműködés fontos eleme vállalati struktúránknak, mellyel gyorsan és rugalmasan tudunk reagálni az Ön igényeire.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Termékprogram

Fertőtlenítés, tisztítás és ápolás

Bialind®	15
Biguanid Fläche N	27
Cleanisept®	26
Cleanisept® Wipes	30
Decontaman	13
Decontaman Liquid	13
Desco Bohrerbad	37
Desco Cleaner	20
Descoderm	8
Descoflex Doboztartó DH	41
Descoflex Falitartó WH	41
Descoflex Mobiltartó MH	41
Descomed	14
Descomed Ölbad	14
Descoprent	36
Descosal	26
Descosept	28
Descosept AF	29
Descosept AF Wipes	28
Descosept Wipes	28
Descosuc	36
Descoton Forte	18
Desco Wipes DT	32
Desco Vital Gel	15
Fertőtlenítő kádak	41
Adagolók	41
Eco Wipes	31
Frezátor	41
Orange Solvent	37
Perfektan® Endo	19
Plurazyme	20
Septoderm® Hände	8
Septoderm® Haut színezett	9
Silikonspray	23
Spezial Ölspray	23
Thermoton® Cleaner	22
Thermoton® Clear	22
Thermoton® Desinfektant	21
Thermoton® N	22
Thermoton® NR	21
Fali adagoló	40



Kéz & bőr Fertőtlenítés

Kézfertőtlenítés
Bőrfertőtlenítés

Oldal **6**



Kéz & Bőr Ápolás

Antimikrobiális tisztítás
Kéz & bőrtisztítás
Kéz & bőrápolás
Vitalizáló kézápolás

Bőrvédelem/-tisztítás
prolind

Oldal **10**



Eszközök

Eszközök és endoszkópok manuális előkészítése
Eszközök és endoszkópok gépi előkészítése
Eszközápolás

Oldal **16**



Felületek

Koncentrátumok felületek fertőtlenítéséhez
Használatra kész gyorsfertőtlenítők
Fertőtlenítő kendők
Felülettisztítók

Oldal **24**



Fogápolás

Speciális termékek a foggyógyászatban

Oldal **34**



Felhasználást segítő eszközök


Fali adagolók, tartók
Adagoló eszközök, gépi adagolók
Fertőtlenítő kádak

Oldal **38**





	Alkalmazási terület			Hatékonyság			Termékjellemzők			
	Hig. kézfertőtlenítés DGHM / VAH megf.	Sebészi kézfertőtlenítés DGHM / VAH megf.	Bőrfertőtlenítés	kori. virucid	Norovírusok	virucid	zsrípótló	parfümmentes	színezőanyag-mentes	adalékanyag mentes
DESCODERM	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
SEPTODERM® HÁNDE	✓	✓		✓	✓		✓		✓	
SEPTODERM® HAUT SZÍNEZETT			✓	✓						

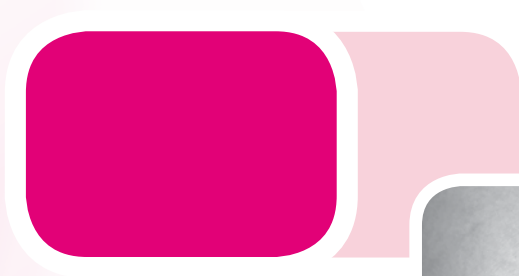

Kéz & Bőr Fertőtlenítés

Az egészségügyi létesítmények személyzetének keze a kórokozók leggyakoribb terjesztője. A rendszeres kézfertőtlenítés ezért elengedhetetlen a kórokozók terjedésének elkerüléséhez.

A biztos és gyors fertőtlenítő-hatékonyság mellett ezért különleges fontosságot tulajdonítunk annak, hogy kéz- és bőrfertőtlenítő termékeink bőrbarátok legyenek.

Így figyelünk arra, hogy lehetőleg ne használjunk felhalmozódó, hosszútávon ható anyagokat és termékeinket ápoló alkotórészekből készítjük, hogy a bőr a mindennapi stressz ellenére ép maradjon.



DESCODERM

alkoholos kéz- és bőrfertőtlenítő szer

- ✓ dermatológiailag ajánlott
- ✓ adalékanyagoktól mentes

- ddermatológiailag ajánlott allergiásoknak és érzékeny bőrűeknek
- potenciálisan allergiát okozó adalékanyagoktól mentes
- spóramentesen szűrt

Alkoholos, parfümentes fertőtlenítő szer bőrbre és kézbe dörzsölésre. Mentese a felhalmozódó, hosszútávon ható anyagoktól vagy egyéb adalékanyagoktól, így nagyon bőrkímélő. Dermatológiailag ajánlott bőr- és/kézfertőtlenítésre, érzékeny bőrűeknek vagy allergiásoknak. Nem tartalmaz aldehidet, fenolt és QAV-t, s pórusmentesen szűrt.

DESCODERM® 2-propanol 70 % (V/V). Oldat, eng.sz.: n.a.
Összetevők: 100 g oldat tartalmaz: 2-Propanol 63,1 g, tisztított víz. Alkalmazási területek: higiéniai és sebészi kézfertőtlenítés. Bőrfertőtlenítés egyszerű injekciók és perifériás erek punkciója előtt, bőrfertőtlenítés operációk és ízületek punkciója előtt, bőrfertőtlenítés faggyúmirigyben gazdag bőrön; hűtőborogatás. Ellenjavallt: nem alkalmazható nyílt sebek fertőtlenítésére. Mellékhatások: a bőrbre való bedörzsöléskor a bőr kipirosodhat, és enyhe égés léphet fel. Figyelmeztetések: Enyhén gyúlékony! Gyúlékony anyagok közelében ne használjuk! Jól becsomagolva tárolja.

A fertőtlenítő szer kifröccsenése esetén haladéktalanul tűz- és robbanásvédelmi intézkedéseket kell tenni. Megfelelő intézkedés pl. a kiömlött folyadék felitatása és vízzel való hígítása, a helyiség kiszellőztetése, illetve a gyúlékony anyagok eltávolítása. Gyermekektől távol tartandó. A lejárati időt követően nem használható.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE
■ higiéniai kézfertőtlenítés	150 ml köpenypalack	20
■ sebészi kézfertőtlenítés	250 ml szórófejes palack	30
■ bőrfertőtlenítés injekciók, punkciók és operációk előtt	500 ml palack adagolóba	20
	1 L palack adagolóba	12
	5 L kanna	3

* A VAH/DGHM/EN 1500 megf. higiénikus kézfertőtlenítés érdekében a 30 mp-es behatási időt feltétlenül be kell tartani!

BEHATÁSI IDŐK

higiéniai kézfertőtlenítés VAH/DGHM/EN 1500 megf. konc.	30 mp.
sebészi kézfertőtlenítés VAH/DGHM/EN 12791 megf. konc.	1,5 perc.
Bőrfertőtlenítés injekciók, perifériás erek punkciója előtt	konc. 15 mp.
Bőrfertőtlenítés operációk, ízületek, testüregek, üreges szervek punkciója előtt	
faggyúmirigyekben szegény bőr	konc. 1 perc.
faggyúmirigyekben gazdag bőr	konc. 10 perc.
baktericid beleértve MRSA, fungicid VAH/DGHM megf.	konc. 30 mp.
Tbc	konc. 30 mp.
hatékony burkos vírusokkal szemben beleértve HBV/HIV/HCV/Vaccinia/ BVDV(korlátozottan virucid az RKI megf.)	konc. 15 mp.*
Rotavírusok	konc. 15 Sek.*
Norovírusok EN 14476 megf. konc.	1 Min. (getestet am murinen Noro-Virus/MNV)

HATÓANYAG 100 G-BAN

63,1 g 2-propanol



SEPTODERM® HÄNDE

alkoholos kézfertőtlenítő szer

- ✓ dermatológiailag tesztelt



- hatékony a Noro- és Rotavírusokkal szemben
- rendkívül bőrbárá
- zsírpótló tulajdonságokkal

Alkoholos kézfertőtlenítő szer bőrbre dörzsölésre.

A SEPTODERM® Hände különösen bőrbárá:

Mentese a felhalmozódó, hosszútávon ható anyagoktól, melyek a bőrbre koncentrálnak, s így bőrirritációhoz vezethetnek. Ezeket túl a SEPTODERM® Hände kiváló minőségű zsírpótló anyagokat tartalmaz, hogy meggátolja a bőr kiszáradását.

SEPTODERM® Hände Oldat, alkoholos kézfertőtlenítő szer a bőrbre dörzsölésre. Zsírpótló anyagokat tartalmaz. Eng.sz.: n.a. Összetevők: 100 g oldat tartalmaz: 2-Propanol 63,14 g. Egyéb összetevők: butan-1,3 diol, Lanolinpoli(oxi)etilén)-xx, illatanyag, tisztított víz. Alkalmazási területek: higiéniai és sebészi kézfertőtlenítés. Baktericid (beleértve a Mycobacterium tuberculosis), fungicid, korlátozottan virucid. Ellenjavallt: Túlérzékenység az alkotóanyagok bármelyikével szemben. Mellékhatások/kölcsönhatások: nem ismert. Figyelmeztetések: Alkoholtartalmú, gyúlékony. Lobbanáspontja 23 °C. A nyílt láng használata tilos. Gyúlékony anyagok közelében ne használjuk. Elektromos készülékeket csak felszáradás után használjunk. A fertőtlenítő szer kifröccsenése esetén haladéktalanul tűz- és robbanásvédelmi intézkedéseket kell tenni. Megfelelő intézkedés pl. a kiömlött folyadék felitatása és vízzel való hígítása, a helyiség kiszellőztetése, illetve a gyúlékony anyagok eltávolítása. Gyermekektől távol tartandó. A lejárati időt követően nem használható.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE
■ higiéniai kézfertőtlenítés	150 ml köpenypalack	20
■ sebészi kézfertőtlenítés	500 ml Descoflex palack	20
	1 L Descoflex palack	12
	5 L kanna	3

BEHATÁSI IDŐK

higiéniai kézfertőtlenítés VAH/DGHM/EN 1500 megf. konc.	30 mp.
sebészi kézfertőtlenítés VAH/DGHM/EN 12791 megf. konc.	1,5perc
baktericid (MRSA is), fungicid (C. albicans) VAH/DGHM megf.	konc. 30 mp.
Tbc	konc. 1 perc
hatékony burkos vírusokkal szemben beleértve HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (korlátozottan virucid az RKI megf.)	konc.15 mp.*
Rotavírusok	konc. 15mp.*
Norovírusok	

HATÓANYAG 100 G-BAN

63,14 g 2-propanol



SEPTODERM® HAUT SZÍNEZETT

színezett alkoholos bőrfertőtlenítő szer

- ✓ rövid behatási idő
- ✓ spóramentesen szűrt

Faggyúmirigyben gazdag
bőr esetén
3 perc behatási idő

- színezett oldat, ezért különösen operatív bőrfertőtlenítésre alkalmas
- rendkívül bőrbarátságos

Használatra kész, alkoholos bőrfertőtlenítő szer. A készítmény a fertőtlenített terület jobb jelölhetősége érdekében piros színű. Elsősorban tehát pre- és posztoperatív bőrfertőtlenítésre használható.

Ezen felül a készítmény alkalmazható injekciók, incíziók, punkciók, vérvételek, katéterezések, kisebb orvosi beavatkozások előtti, illetve baleseti és jelentéktlenebb sérülések bőrfertőtlenítésére.

Nagyon bőrbarátságos, mivel mentes a felhalmozódó, hosszútávon ható anyagoktól.

Nem tartalmaz aldehidet, fenolt és QAV-t, illetve spóramentesen szűrt.

SEPTODERM® HAUT színezett alkoholos bőrfertőtlenítő szer permetezésre vagy lemosásra, eng.sz.: n.a. Összetevők: 100 g oldat tartalmaz: 2-Propanol 63,14 g. Egyéb összetevők: 1,3-Butandioll, illatanyag, E102 és E127 színezőanyagok, tisztított víz. Alkalmazási területek: bőrfertőtlenítés operációk, incíziók, punkciók és injekciók előtt. Ellenjavallt: nyálkahártyán és nyílt sebekben nem alkalmazható. Mellékhatások/ kölcsönhatások: nem ismert. Figyelmeztetések: Alkoholtartalmú, gyúlékony. Lobbanáspontja 23 °C. A nyílt láng használata tilos. Gyúlékony anyagok közelében ne használjuk. Elektromos készülékeket csak felszáradás után használjunk. A fertőtlenítő szer kifröccsenése esetén haladéktalanul tűz- és robbanásvédelmi intézkedéseket kell tenni. Megfelelő intézkedés pl. a kiömlött folyadék felitása és vízzel való hígítása, a helyiség kiszellőztetése, illetve a gyúlékony anyagok eltávolítása. Tartrazint és eritrozint tartalmaz. Érintkezés esetén érzékenyítő hatását nem vizsgálták. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén a tünetek: eufória, felszabadultság, koordinációs zavarok, kivörösödő arc, a lehelet jellegzetes szaga, súlyos esetben kóma. Ellenintézkedések: gyomormosás, szükség esetén mesterséges lélegeztetés, egyébként tüneti kezelés. Gyermekektől távol tartandó. A lejárati időt követően nem használható.



BEHATÁSI IDŐK

Bőrfertőtlenítés injekciók, perifériás erek punkciója előtt
konc. 15 mp.

Bőrfertőtlenítés operációk, ízületek, testüregek, üregek szervek punkciója előtt
faggyúmirigyekben szegény bőr konc. 1 perc
faggyúmirigyekben gazdag bőr konc. 3 perc

baktericid beleértve MRSA, fungicid
VAH/DGHM megf. konc. 30 mp.
Tbc konc. 1 perc

hatékony burkos vírusokkal szemben
beleértve HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV
(korlátozottan virucid az RKI megf.)
konc. 30 mp.

HATÓANYAG 100 G-BAN

63,14 g 2-propanol

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- különösen operációk előtti bőrfertőtlenítés
- incíziók, punkciók, injekciók előtti bőrfertőtlenítés

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK

Forma	CSE
250 ml szórófejes palack	30
1 L Descoflex palack	10
5 L kanna	3

Kéz- és bőrfertőtlenítés kombinálva

Javaslatunk kisebb orvosi intézmények részére

Az összehasonlításban alacsonyabb kéz- és bőrfertőtlenítő szer fogyasztással rendelkező orvosi létesítményeknek ajánljuk DESCODERM készítményünket. Ez a gyógyszerterv értelmében engedélyezett higiéniai és sebészi kézfertőtlenítéshez, illetve bőrfertőtlenítéshez.

Kombinált készítményként így nagyon gazdaságos, mivel két alkalmazási mód egyetlen készítménnyel megvalósítható.

... és az allergiások

A DESCODERM további előnye, hogy adalékanyagoktól mentes. A bgw (Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst & Wohlfahrtspflege) ajánlásának megfelelően sem színezőanyagot, sem parfümöt nem tartalmaz. Ezért a DESCODERM kifejezetten ajánlott olyanoknak, akik hajlamosak bőrallergiára, illetve rendkívül érzékeny bőrűek.







Bőr & kezek Ápolás

A vízhatlan kesztyűk mindennapi használata, a gyakori mosdás, illetve az orvostudományban használt rengeteg alkotóelemmel és anyaggal való kapcsolat nagy kihívást jelent a bőrnek.

Rendszeres ápolás nélkül a bőr gyorsan kiszárad és kis repedések képződnek rajta. Ezáltal a bőr védőfunkciója súlyosan károsul – a kórokozók könnyen behatolnak és fertőzéseket okozhatnak.

Termékprogramunk ezért kiváló minőségű ápolóolajokkal, hidratáló és bőrregeneráló alkotóelemekkel készült ápolási termékeket, valamint különösen lágy folyékony szappanokat kínál. Ezáltal a bőr kímélően tisztítható, illetve intenzíven ápolható, s a napi terhelés ellenére ép marad.

MRE = MRSA, ORSA, VRE és ESBL



Az MRE jelentése „multirezisztens kórokozó”.

Az MRE fogalom különböző baktériumtörzseket takar, melyek nagyfokú ellenállást fejlesztettek ki az antibiotikumokkal szemben. Az MRE okozta fertőzések így nehezen kezelhetőek. Az egészségügyi létesítményekben az MRE fertőzések a leggyakoribb és legproblémásabb nozokomiális fertőzések közé tartoznak. Az MRE csoportjába tartozik az MRSA (Multi-/Methicillin-Resistenter Staphylococcus aureus), az ORSA (Oxacillin-Resistenter Staphylococcus aureus), a VRE (Vancomycin-Resistente Enterococcusok) és az ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamases) képző baktérium.

Fertőtlenítéssel szembeni közepes rezisztencia az MRSA/MRE esetén?

A multirezisztens kórokozók (MRE) kizárólag az antibiotikumok hatóanyagaival szemben rezisztensek. A fertőtlenítőszernek más hatásmechanizmusuk van, így az MRE nem képes a fertőtlenítőszer hatóanyagaival szembeni ellenállás kifejlesztésére.

A VAH/DGGM felsorolásában szereplő fertőtlenítőszerbiztos megölik a multirezisztens kórokozókat (MRE).

Higiénia-management az MRSA/MRE esetén

Mivel az MRSA/MRE pozitív páciensek gyógyszeres terápiája az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia miatt meglehetősen nehéz, a konzekvens higiénia-management gyakran az egyetlen lehetőség arra, hogy a fertőzésláncot megállítsák.

A rendszeres kézfertőtlenítés és az összes fertőzött terület fertőtlenítése mellett az MRSA/MRE pozitív páciensek terápiája is fontos szerepet játszik. Ebben döntő jelentőségű a gyors és megbízható hatékonyság, s főként a bőrbárát tulajdonság. Az átfogó tájékoztatás és az egészségügyi személyzet oktatása, valamint a munkafolyamatok megállapítása az eljárási és munkaügyi utasításokban, valamint azok szigorú betartása döntő szereppel bír.

Innovatív DECONTAMAN termékcsaládunkkal a bőrbárát és gyorsan ható polihexanid hatóanyagon alapuló személyi terápiát célozzuk meg, így termékprogramunk összes eszköz-, felület-, bőr- és kézfertőtlenítő szerét kombinálva, valamint az egészségügyi személyzet megfelelő eljárási és munkaügyi utasításaival az MRE elterjedésének esetére komplett higiénia-management áll rendelkezésre.

DECONTAMAN

antimikrobiális mosószer bőrre és kézre

- rendkívül gyorsan hat
- MRSA, ORSA, VRE csíraszám csökkentése
- polihexaniddal

Mosószer a bőr és a kezek egyidejű tisztításával és fertőtlenítésével, magas zsír- és fehérjeszennyezéshez is, ld. élelmiszeripar. A DECONTAMAN különösen bőrbarát. Bőrbarát polihexanidon alapszik, alkohol-, fenol- és színezőanyag-mentes. Az Öko-Testnek megfelelő parfümözéssel.

A DGHM-nek megfelelő higiénikus kézmosáshoz, antimikrobiális testtisztításhoz MRSA megtelepedésekor, illetve más multirezisztens kórokozónál, mint VRE és ESBL baktériumoknál, valamint Acinetobacter baumannii esetében. Alkalmas hajmosásra is; különösen viszketéskor és korpa esetén.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- a antimikrobiális test- és hajmosás MRSA megtelepedésekor, illetve más multirezisztens kórokozónál
- higiénés kézmosás megf. VAH/DGHM

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK

Szállítási forma	CSE
500 ml palack adagolóba	20
1 l palack adagolóba	12
5 l kanna	3

- ✓ ÖGHMP listázva
- ✓ MRSA elpusztításához
- ✓ polihexaniddal

Acinetobacter baumannii inaktíváló



BEHATÁSI IDŐK

Testtisztítás MRSA	30 mp.
hig. kézmosás	
DGHM/prEN 12054/EN 1499 megf.	30 mp.

hatékony burkos vírusokkal szemben beleértve HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (korlátozottan virucid az RKI megf.) 30 mp.
Acinetobacter baumannii 15 mp.

HATÓANYAG 100 G-BAN

0,995 g polihexanid

DECONTAMAN LIQUID

csíraszámot csökkentő tisztító oldat bőrre és nyálkahártyára

- rendkívül bőr- és nyálkahártyabarát
- MRSA, ORSA, VRE sterilizálás
- polihexaniddal

Használatra kész, csíraszámot csökkentő tisztító oldat bőrre és nyálkahártyára. Különösen érzékeny bőrfelületeken is alkalmazható, pl. sztóma kezeléséhez. Polihexanid alapú, ezért csíraszám csökkentő hatású olyan baktériumokkal szemben is, mint az MRSA/ORSA/VRE és Acinetobacter baumannii. Stabilizálja a bőr fiziológiai flóráját és csökkenti a kellemetlen testszagot.

- ✓ MRSA elpusztításához
- ✓ polihexaniddal

Acinetobacter baumannii inaktíváló



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- csíraszámot csökkentő testtisztítás MRSA megtelepedésekor, illetve más multirezisztens kórokozónál

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK

Szállítási forma	CSE
250 ml kerek palack	30
500 ml palack	20
1 l Descoflex palack	10

HATÓIDŐK

MRSA	konc.	30 mp
VRE	konc.	1 perc
Acinetobacter baumannii	konc.	15 mp



DESCOMED

Bőrtisztító és –ápoló hab

- ✓ FCKW-mentes
- ✓ d-panthenollal és allantoinnal

- lágy tisztítás víz és szappan használata nélkül
- különösen érzékeny bőrre
- dezodoráló hatás



Különösen bőrbarát, ápoló tisztító hab igénybevett, érzékeny vagy már sérült bőrre. Gyors és praktikus bőrtisztítás fekvő, inkontinens és sztomás pácienseknél.

Kiváló minőségű d-panthenol és allantoin bőrápoló és regeneráló összetevőkkel.

Dezodoráló hatás speciális szagmegkötő összetevőkkel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE
<ul style="list-style-type: none"> ■ különösen bőrbarát, gyors és praktikus tisztítás igénybevett, érzékeny és már sérült bőrre 	500 ml szórófejes palack	12

DESCOMED ÖLBAD

gyógyászati olajfürdő bőrápoláshoz

- ✓ aloe verával, jojoba olajjal, d-panthenollal és E-vitaminnal



- intenzív ápolás különösen érzékeny, száraz bőrre
- nagyon kiváló minőségű ápoló olajok
- csökkenti a viszketést



Nagyon kiváló minőségű fürdőolaj. Különösen kiadós, mivel kialakítása kizárólag kiváló minőségű ápoló olajokon alapszik, mint a repce és a jojoba olaj, s nélkülöztük a víz hozzáadását. A fő összetevők, mint az aloe vera és a d-panthenol csökkentik a viszketést és pótolják a nedvességet.

A DESCOMED ÖLBAD ezért ideálisan alkalmazható nagyon száraz, viszkető és hámló bőrre, pl. időseknél, fekvő betegeknél, inkontinens pácienseknél, illetve ekcémás bőrbetegségeknél.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE
<ul style="list-style-type: none"> ■ különösen kiváló minőségű fürdőolaj-adalék nagyon száraz, viszkető, hámló és ekcémás bőr intenzív ápolására 	250 ml PET palack	9
	500 ml palack	6
	2 l hordozható palack	6
	5 l kanna	3

DESCO VITAL GEL

Vitalizáló gél bőrbe dörzsölésre

✓ zsírpótló

✓ színezőanyagok és tartósítószer nélkül



- vitalizáló és elősegíti a vérellátást
- értékes gyógyító növényi olajokkal
- jobb bőrérzet az optimalizált zsírpótlással



Hidrogél a bőr aktivizálásához és jobb vérellátáshoz beteg- és idősgondozásban. Kellemes hűs hatású, ellazítja az izmokat és aktivál.

Kiváló minőségű gyógynövényi olajokkal lucfenyő tűleveléből, eukaliptuszból, borókabogyóból és kakukkfűből.

A DESCO VITAL GEL nagyon bőrbarát, mivel etanolon alapszik, s zsírpótló tulajdonságokkal bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- a bőr aktivizálása és a vérellátás serkentése a beteg- és idősgondozásban
Altenpflege
- sport- és gyógmasszázs

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK CSE

100 ml	tubus	30
500 ml	palack	20

BIALIND®

bőr- és kézápoló krém

✓ pH-bőrsemleges



- gyorsan beszívódik a bőrbe, zsírosodás nélkül
- az allantoin segíti a bőr regenerálódását
- pH-bőrsemleges



Olaj-víz emulzió a gyakori kézfertőtlenítés és mosás miatt igénybevett bőrre. Ideális az egészségügyi személyzet számára, mivel rendkívül gyorsan beszívódik a bőrbe, zsírosodás nélkül. Így a gyakori használat ellenére a munkamenetet nem zavarja. A speciálisan bőrvédő és regeneráló allantoin összetevővel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- kézápolás a kézfertőtlenítés -mosás után
- teljes testápolás

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK

CSE

100 ml	tubus	12
500 ml	palack adagolóba	20





Eszközök

A kórokozókkal fertőzött egészségügyi termékek emberi fertőzések forrásai lehetnek.

A biztos fertőtlenítő hatás, a tág hatásspektrum, illetve a jó tisztítóerő ezért alapvető feltétel eszközfertőtlenítő szereink kifejlesztésénél.

A nagyfokú felhasználó-barátság azonban ugyanolyan fontos szerepet játszik. Ennek következtében termékeink a lehető legkisebb mértékben tartalmaznak veszélyes anyagokat, így környezetbarátok és anyagkímélőek.



PENTAX, STORZ, OLYMPUS-WINTER & IBE, WOLF
által tesztelve

Hellich
ZENTRIFUGEN
által jóváhagyott

DESCOTON FORTE ✓ fenolmentes

fertőtlenítőszer eszközökhöz és endoszkópokhoz

- RKI ajánlásnak megf. virucid
- anyagkímélő – alkalmas endoszkópok előkészítésére
- RKI besorolt az IfSG szerint járvány esetén fertőtlenítésre

Anyagkímélő, fenolmentes eszközfertőtlenítő szer jó tisztítóerővel és jó korrózióvédelemmel.

Kiválóan alkalmas endoszkópok előkészítésére. Alkalmazható a Storz, Olympus Winter & Ibe und Wolf cégek endoszkópjaihoz.

Alacsony alkalmazási koncentrációja miatt a VAH/DGHM alapján a DESCOTON FORTE nagyon gazdaságos.

Biológiailag lebomló a szakvélemény szerint.

A DESCOTON FORTE átfogóan virucid az RKI ajánlásának megfelelően, illetve az IfSG szerint az RKI által besorolt járvány esetén fertőtlenítésre.



CE 0482

ADAGOLÁS/BEHATÁSI IDŐK

baktericid beleértve Tbc, MRSA, fungicid VAH/DGHM megf.	2 %	60 perc
	3 %	15 perc
RKI szerint járvány esetén	3 %	2 óra
	5 %	1 óra
sporicid	3 %	12 óra
hatékony burkos vírusokkal szemben beleértve HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (korlátozottan virucid az RKI megf.)	1 %	15 perc
adono-vírusok	1 %	30 perc
	2 %	15 perc
papova-/Polyoma-vírusok	1 %	60 perc
HAV	6 %	2 óra
polio-vírus	2 %	1 óra
	4 %	30 perc
virucid az RKI megf.	2 %	1 óra
	4 %	30 perc

HATÓANYAG 100 G-BAN

7,6 g metanol, 4,5 g glutáraldehid

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


- mindenféle gyógyászati kellékek fertőtlenítése és tisztítása
- flexibilis és merev endoszkópok fertőtlenítése és tisztítása

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK

1 L	adagolóflakon	10
2 L	hordozható palack	6
5 L	kanna	3

Az eszközök előkészítésének körforgása

Az eszközök előkészítésének körforgása a DGSV (Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung e.V.), illetve az RKI ajánlása alapján gyógyászati termékek előkészítésére vonatkozóan.

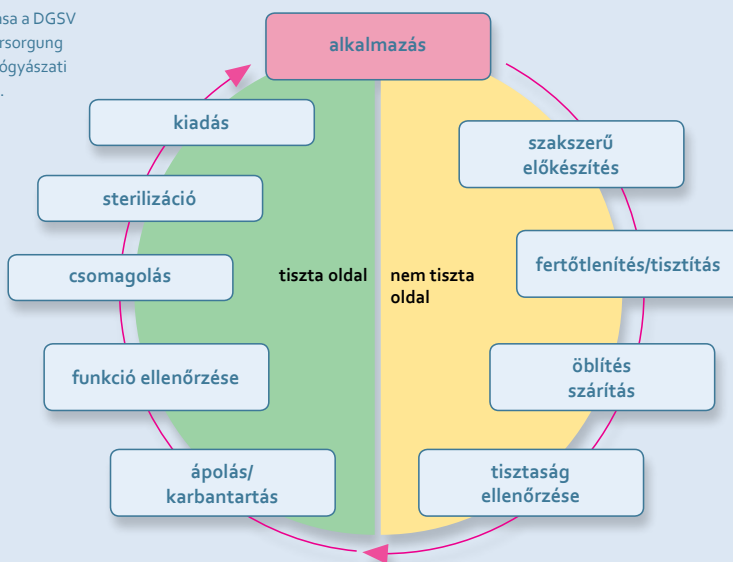



PERFEKTAN® ENDO

fertőtlenítő szer eszközökhöz és endoszkópokhoz

✓ átfogó hatékonyság vírusokkal szemben

✓ aldehidmentes

✓ fenolmentes

- aldehidmentes készítmény jó tisztítóerővel
- anyagkímélő – alkalmas endoszkópok előkészítésére
- átfogó hatékonyság vírusokkal szemben

Anyagkímélő, aldehid- és fenolmentes eszközfertőtlenítő szer jó tisztítóerővel és jó korrózióvédelemmel. Alkalmas ultrahangos kádban történő használatra.

Kiválóan alkalmas endoszkópok előkészítésére. Alkalmazható a Storz, Olympus Winter & Ibe und Wolf cégek endoszkópjaihoz. A jó tisztítóerő egy munkamenetben teszi lehetővé a fertőtlenítést és a tisztítást. Az RKI endoszkóp előkészítésre vonatkozó ajánlásának megfelelően az aldehidmentes kialakításának köszönhetően a fehérjék nem rögzülnek. A személyzet védelme érdekében ezért előzetes tisztítás nélkül azonnal képes fertőtleníteni.

A PERFEKTAN® terméksorozat összes terméke megfelel a TRGS 525/540 munkabiztonsággal kapcsolatos törvényi kötelezettségeinek.

A PERFEKTAN® terméksorozat összes terméke megfelel a TRGS 525/540 munkabiztonsággal kapcsolatos törvényi kötelezettségeinek.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- mindenféle gyógyászati kellékek fertőtlenítése és tisztítása
- flexibilis és merev endoszkópok fertőtlenítése és tisztítása

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK CSE

1 L	adagolóflakon	10
2 L	hordozható palack	6
5 L	kanna	3



STORZ, OLYMPUS-WINTER & IBE, WOLF
által jóváhagyott



CE 0482

ADAGOLÁS/BEHATÁSI IDŐK

baktericid beleértve MRSA, fungicid VAH/DGHH megf.

	1 %	60 perc
	2 %	30 perc
	3 %	15 perc
Tbc	1 %	60 perc
	2 %	30 perc
	3 %	15 perc

Ultrahangos kád 1 % 5 perc

hatékony burkos vírusokkal szemben beleértve HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (korlátozottan virucid az RKI megf.)

	1 %	30 Min.
	2 %	15 Min.
Adenovírusok	2 %	60 Min.
	4 %	30 Min.
Papova-/Polyomavírusok	1 %	60 Min.
	2 %	30 Min.
Poliovírus (50 °C-on)	1 %	10 Min.

HATÓANYAG 100 G-BAN

3,75 g Cocosporylendiaminguanidiniumdiacetat
5,63 g Didecylloxethylmethylammoniumpropionat

Fehérjék megtelepedése gyógyászati eszközökön

Fehérjék gyógyászati eszközökön történő megtelepedésének elkerülése

Az aldehides eszközök, beleértve azokat, melyek nem tartalmaznak tisztító alkotóelemeket, vegyi tulajdonságaiknak köszönhetően nagyon erős reakcióba lépnek fehérjékkel.

Ez a reakció olyan erős is lehet, hogy a vérfehérje és a potenciálisan benne lévő kórokozók a gyógyászati eszközökön megtelepedhetnek.

Ezért az aldehides készítmények használata előtt megelőző mechanikus eszköztisztításra van szükség, hogy a fehérjeszennyeződést már a tulajdonképpeni fertőtlenítést megelőzően megszüntessük. Az aldehidet nem tartalmazó termékek alig hajlamosak a fehérjék megtelepedésére.

A személyzet védelme érdekében ezért a jó tisztítóerejű, aldehidmentes készítmények egy munkamenetben alkalmazhatóak tisztításra és fertőtlenítésre.





DESCO CLEANER

tisztítópor eszközökhöz



- kiváló tisztítóerő
- különösen ultrahangos kádban való használatra alkalmas
- gyorsan hat



Alkáli, különösen erős és alapos gyorstisztító alkáli ellenálló eszközökhöz és fém, műanyag, kerámia, üveg, valamint porcelán tárgyakhoz. Magas fehérje- és vérszennyezés esetén ideális tisztítópor minden orvosi területen és laborban. A DESCO CLEANER főként önmagában használható, s csak DESCOTON termékekkel keverhető. Alkalmas ultrahangos eszközökben való használatra.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE	ADAGOLÁS
■ mindenféle alkáli stabil gyógyászati eszközök tisztítása	1 Kg doboz 5 Kg vödör	6 1	Szennyeződés szerint 0,5 % - 1 %

PLURAZYME

enzimes tisztítószer eszközökhöz és endoszkópokhoz

- ✓ pH-semleges
- ✓ szagtalan



- kiváló tisztítóerő a multi-enzim komplexummal
- különösen magas és stabil enzimaktivitás
- különösen anyagkímélő



A nagyon anyagbarát PLURAZYME pH-semleges, enzimes tisztítószer eszközökhöz és endoszkópokhoz. A magas enzimaktivitás kiváló tisztítóerőt biztosít, s hatékonyan eltávolítja a bioréteget. Sok más konkurens termékkel ellentétben a PLURAZYME különösen magas, hosszú távú enzimaktivitást kínál.

STORZ
által jóváhagyott

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE	ADAGOLÁS/BEHATÁSI IDŐK
■ eszközök tisztítása ■ hőérzékeny endoszkópok tisztítása	2 L hordozható palack 5 L kanna	6 3	eszközök és endoszkópok tisztítása adagolás: 2,5 - 20 ml/L behatási idő: 2 - 15 perc

THERMOTON® NR

tisztító kemotermikus endoszkóp előkészítéséhez

- ✓ különösen nagy tisztítóerő
- ✓ pH-semleges



- különösen anyagkímélő
- hitelesített tisztító teljesítmény
- pH-semleges



CE

Különösen anyagbarát, pH-semleges és erőteljes tisztító kemotermikus endoszkópok előkészítéséhez az összes gyártó endoszkópmosó gépéhez. Az endoszkópmosó gépekben kifejtett tisztító hatás szakmailag igazolt. Enzimentes hatóanyag-komplexuma miatt a THERMOTON® NR 93 °C-on is alkalmas kemotermikus eszköz előkészítésre. A pH-semlegesség kímélő tisztítást biztosít, s megtakarítja az alkáli tisztítóknál szükséges további neutralizáló utómosást.

PENTAX - listázva

STORZ
által jóváhagyott

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- flexibilis és rögzített endoszkópok tisztítása kemotermikus eljárással
- kemotermikus eszköz-előkészítés 60-93 °C-on

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK

Forma	CSE
5 L lapos kanna	3
10 L kanna	1
30 kg kanna	1
200 kg hordó	1

ADAGOLÁS

Szennyeződés szerint	0,3 - 0,7 %
endoszkóp előkészítése	0,4 - 0,6 %

- ✓ formaldehidmentes
- ✓ különösen anyagkímélő

THERMOTON® DESINFEKTANT

fertőtlenítőszer kemotermikus endoszkóp előkészítéséhez

- alacsony aldehidtartalma miatt felhasználóbarát
- minimális szaghatás
- az RKI ajánlásnak megf. virucid

STORZ által jóváhagyott



Formaldehidmentes, különösen anyagkímélő készítmény flexibilis endoszkópok kemotermikus fertőtlenítéséhez 50-60 °C-on. A semleges előtisztító THERMOTON® NR kombinálásával optimális lehetőség nyílik az endoszkópmosó gépekben a kímélő tisztításra és fertőtlenítésére. Az ezt megelőző manuális endoszkóp előkészítés ideális esetben az Instru Plus vagy Perfektan® NEU és Perfektan® ENDO segítségével zajlik. A THERMOTON® DESINFEKTANT különösen anyagkímélő, mivel összetétele bizonyított termelési rendszerrel glutaraldehid alapul.

CE 0482

Alacsony aldehid-tartalma miatt szagkibocsájtása jóval kisebb, mint sok más hasonló készítményé. A THERMOTON® DESINFEKTANT az RKI ajánlásának megfelelően virucid.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- flexibilis és rögzített merev endoszkópok tisztítása kemotermikus eljárással endoszkópmosó gépekben minden gyártótól 50-60 °C-on

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK

5 L	lapos kanna	3
-----	-------------	---

ADAGOLÁS/BEHATÁSI IDŐK

baktericid beleértve E. faecium, Tbc, MRSA, fungicid	1 %	5 perc
Vaccinavírusok	1 %	5 perc
Adenovírusok	1 %	5 perc
Papova-/Polyomavírusok	1 %	5 perc
Poliovírus (55 °C-on)	1 %	5 perc

virucid		
az RKI megf. (55 °C-on)	1 %	5 perc
(beleértve HBV/HIV/HCV)		

HATÓANYAG 100 G-BAN

10,0 g Glutaraldehid



THERMOTON® N

semlegesítő utómosószer



- foszforsav alapú
- jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- korrózió-gátló összetevőkkel

CE

A THERMOTON® N folyékony, semlegesítő utómosószerként alkáli tisztítók használata során alkalmazható. Foszforsav alapú. Tenzidmentes.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE	ADAGOLÁS
<ul style="list-style-type: none"> semlegesítő utómosószer vegyi eszközök kemotermikus előkészítéséhez speciális mosóautomatákban 	5 L lapos kanna 10 L kanna 30 kg kanna 200 kg hordó	3 1 1 1	semlegesítő szerként 1 - 3 ml/L

THERMOTON® CLEAR

öblítő szer semlegesítő tulajdonságokkal



- citromsav alapú
- biztosítja az öblített tárgyak foltmentes száradását
- korrózió-gátló összetevőkkel

CE

Folyékony, biológiailag lebomló, cseppmentesen száradó öblítő szer. Nagyobb alkalmazási koncentrációval semlegesítő szerként alkáli tisztítók használata során is alkalmazható.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE	ADAGOLÁS
<ul style="list-style-type: none"> öblítő és semlegesítő utómosószer vegyi eszközök kemotermikus előkészítéséhez speciális mosóautomatákban 	2 L hordozható palack 5 L lapos kanna 30 kg kanna 200 kg hordó	6 3 1 1	öblítőként 0,1 - 0,5 ml/L semlegesítő szerként 1 - 3 ml/L

THERMOTON® CLEANER

alkáli folyékony tisztító

- ✓ foszfátmentes
- ✓ kiváló tisztítóeszköz



- pH > 10az RKI ajánlásának megf. prion-profilaxis
- kevésbé habzik
- korrózió-gátló összetevőkkel

CE

Alkáli folyékony tisztító mindenféle alkáli stabil eszközök kemotermikus előkészítéséhez. 93 °C-ig alkalmazható.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE	ADAGOLÁS
<ul style="list-style-type: none"> hőérzékeny eszközök tisztítása kemotermikus eljárással 93 °C-ig speciális mosóautomatákban 	5 L lapos kanna 30 kg kanna 200 kg hordó	3 1 1	Szennyeződés szerint 3 - 7 ml/L

SPEZIAL ÖLSPRAY ✓ FCKW-mentes

ápolóspray eszközökhöz



- toxikológiailag jelentéktelen gyógyászati paraffinolaj alapú
- eszközök kezeléséhez gőzsterilizálás előtt
- a mozgatható részek optimális kenése

CE

Toxikológiailag jelentéktelen orvosi paraffinolajokat tartalmazó eszközápoló spray. Gőzsterilizálás előtt lágy, egyenletes védőrétegről gondoskodik. Lég- vagy golyós csapágyas turbinák, kézi és könyökdarabok, illetve merev endoszkópok csapjainak kezeléséhez is.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- eszközápoló spray gyógyászati eszközökhöz, lég- vagy golyós csapágyas turbinákhoz, kézi és könyökdarabokhoz, illetve merev endoszkópok csapjaihoz

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK

500 ml Spraydose

CSE

12

SILIKONSPRAY ✓ FCKW-mentes

ápolóspray eszközökhöz



- szilikonolaj alapú
- eszközök ápolásához hőlégmentesítés előtt
- biztosítja a mozgó alkatrészek megfelelő olajozottságát

CE

Toxikológiailag jelentéktelen orvosi paraffinolajokat tartalmazó eszközápoló spray. Gőzsterilizálás előtt lágy, egyenletes védőrétegről gondoskodik. Lég- vagy golyós csapágyas turbinák, kézi és könyökdarabok, illetve merev endoszkópok csapjainak kezeléséhez is.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- eszközápoló spray gyógyászati eszközökhöz, lég- vagy golyós csapágyas turbinákhoz, kézi és könyökdarabokhoz, illetve merev endoszkópok csapjaihoz

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK

500 ml spray flakon

CSE

12





Felületek

A felületek tisztítása és fertőtlenítése fontos intézkedés ahhoz, hogy az egészségügyi létesítmények általános higiéniáját fenntartsuk.

Mivel készítményeink alkalmazási területe a padlótól és falaktól a felületeken át az eszközökig és gépekig terjed, a fertőtlenítő hatás mellett a tisztító képesség és az anyagbarát tulajdonság is fontos szerepet játszik.

Speciálisan kombinált felülettisztító- és fertőtlenítő szereket kínálunk kiváló tisztító képességgel és nagy anyagbarát tulajdonsággal, melyek a lehető legrövidebb időn belül hatnak. Széles hatásspektrumuk miatt kockázatos területeken is használhatóak.

Szagterhelésük a modern kialakítás miatt minimális, ami különösen felhasználóbaráttá teszi készítményeinket.



CLEANISEPT®

folyékony koncentrátum felületfertőtlenítéshez és tisztításhoz

- ✓ aldehidmentes
- ✓ fenolmentes



- aldehidmentes készítmény jó tisztítóerővel
- szerepel a DVG listáján – élelmiszeriparban történő használatra
- parfümmentes

Aldehid- és fenolmentes koncentrátum gyógyászati kellékek, pl. inkubátorok, gyógyászati termékek, illetve bármely felületek fertőtlenítéséhez és tisztításához. Alkoholra érzékeny felületekre, mint amilyen az akrilüveg, illetve alkoholmentes gyors fertőtlenítésére is alkalmas, pl. fürdőkádadokban.

A CLEANISEPT® optimális tulajdonságokkal rendelkezik az élelmiszeriparban és nagy konyhákban történő alkalmazáshoz.

Nagy zsíroltó erővel rendelkezik, szerepel a DVG listáján és parfümmentes.

Megfelel az európai biocid irányvonalnak és szerepel az ÖGHMP listáján.

CE 0482

ADAGOLÁS/BEHATÁSI IDŐK

baktericid beleértve MRSA, fungicid VAH/DGHM megf.	2,5 %	15 perc
	2 %	30 perc
	1 %	60 perc
gyors fertőtlenítés	7,5 %	1 perc
	5 %	5 perc

hatékony burkos vírusokkal szemben beleértve HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (korlátozottan virucid az RKI megf.)	2,5 %	5 perc
	2 %	15 perc
(terhelés nélkül)	0,5 %	5 perc
Rotavírusok	0,5 %	30 mp.
Papova-/Polyomavírusok	2 %	30 perc
	7,5 %	2 perc

HATÓANYAG 100 G-BAN

3,33 g didecyl-dimethyl-ammonium-klorid
6,66 g benzil-alkil-dimethyl-ammonium-klorid

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- gyógyászati termékek fertőtlenítése és tisztítása
- gyógyászati kellékek és mindenféle felület fertőtlenítése és tisztítása a biocid irányvonalnak megf.

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE
10 ml tasak	320
1 L adagolóflakon	10
2 L hordozható palack	6
5 L kanna	3
10 L kanna	1
25 L kanna	1



DESCOSAL

folyékony koncentrátum felületfertőtlenítéshez és tisztításhoz

- ✓ formaldehidmentes
- ✓ gluteráldehid-mentes
- ✓ fenolmentes



- formaldehid- és gluteráldehid-mentes készítmény
- szagtalan
- parfümmentes

CE 0482

Formaldehid- és gluteráldehid-mentes kombinációs készítmény gyógyászati kellékek, termékek, illetve mindenféle felület fertőtlenítéséhez és tisztításához.

ADAGOLÁS/BEHATÁSI IDŐK

baktericid beleértve MRSA, fungicid VAH/DGHM megf.	2 %	15 perc
	0,5 %	60 perc
	5 %	60 perc
Tbc	5 %	30 perc

hatékony burkos vírusokkal szemben beleértve HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (korlátozottan virucid az RKI megf.)	0,5 %	60 perc
	1 %	5 perc
Rotavírusok	0,5 %	1 perc

HATÓANYAG 100 G-BAN

9,5 g etándiol, 22,0 g benzil-alkil-dimethyl-ammonium-klorid

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- gyógyászati termékek fertőtlenítése és tisztítása
- gyógyászati kellékek és mindenféle felület fertőtlenítése és tisztítása a Biocid irányvonalnak megf.

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE
1 L adagolóflakon	10
2 L hordozható palack	6
5 L kanna	3
10 L kanna	1

BIGUANID FLÄCHE N

folyékony koncentrátum felületfertőtlenítéshez és tisztításhoz

- ✓ aldehidmentes
- ✓ fenolmentes

- aldehidmentes készítmény jó tisztítóerővel
- tuberkulocid, hatékony a Norovírusokkal szemben
- kellemes illat

Aldehid- és fenolmentes koncentrátum gyógyászati kellékek, pl. lélegeztető maszkok és inkubátorok, gyógyászati termékek, illetve mindenféle felületek fertőtlenítéséhez és tisztításához. Alkoholra érzékeny felületek gyors fertőtlenítésére is alkalmas, pl. fürdőkádadokban.

A készítményt a DVG irányvonalainak megfelelően ellenőrizték, így alkalmas az élelmiszeriparban és nagy konyhákban történő alkalmazásra.

A BIGUANID FLÄCHE N széles vírushatókörrel rendelkezik, beleértve a Norovírusokat is. Ezen felül tuberkulocid.

Átesett a VAH, DGHM, illetve ÖGHMP irányvonalaknak megfelelő ellenőrzésen, és megfelel az európai biocid irányvonalnak.



CE 0482



ADAGOLÁS/BEHATÁSI IDŐK

baktericid beleértve MRSA, fungicid VAH/DGHM megf.	1 %	15 perc
	0,5 %	60 perc
	0,25 %	4 óra
gyors fertőtlenítés	3 %	1 perc
	2 %	5 perc
Tbc	0,5 %	60 perc
hatékony burkos vírusokkal szemben beleértve HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (korlátozottan virucid az RKI megf.)	0,5 %	15 perc
Adenovírusok	2 %	4 óra
Rotavírusok	0,25 %	15 perc
Papova-/Polyomavírusok	1 %	60 perc

HATÓANYAG 100 G-BAN

16,0 g benzil-alkil-dimetil-ammonium-klorid

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- gyógyászati termékek fertőtlenítése és tisztítása
- gyógyászati kellékek és mindenféle felület fertőtlenítése és tisztítása a biocid irányvonalnak megf.

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE
40 ml tasak	200
1 L adagolóflakon	10
2 L hordozható palack	6
5 L kanna	3
10 L kanna	1
25 L kanna	1

Mi a QAV?

A QAV kvaterner ammóniumvegyületeket takar. Az általános köznyelvben gyakran „kvatok”-nak is nevezik őket.

Szinte minden fertőtlenítőszeret gyártó cég használ QAV-t aldehidmentes hatóanyagként készítményeiben. Ez a hatóanyagcsoport jó tisztító tulajdonságaival, rendkívül alacsony toxicitásával, illetve alacsony illóságával emelkedik ki. Ezért a kizárólag QAV-alapú készítmények szinte szagtalanok, különösen összehasonlítva más aldehides készítményekkel.

Alacsony illóságuk miatt a QAV-ok azonban használatkor hosszabb ideig kristályos réteget képeznek a fertőtlenített felületen. Ezt ionmentes tenzidekkel, pl. **Hansa Clean Spezial** nevű termékünkkel rendszeres időközönként el kell távolítani. Máskülönben fennállhat a ragadóhatás.

QAV-mentes készítmények, pl. **OPTISAL N** termékünk használata esetén az esetleges ragadó hatás teljesen megelőzhető.



Beim Einsatz von Flächendesinfektionsmitteln können Klebeeefekte auftreten.



DESCOCEPT / DESCOCEPT WIPES

alkoholos gyorsfertőtlenítő

- ✓ dermatológiailag tesztelt
- ✓ formaldehidmentes
- ✓ fenolmentes



- formaldehidmentes gyorsfertőtlenítő kellemes illattal
- gyorsan hat
- bőrbarát

CE 0482



DESOTEX PREMIUM VLIES

Használatra kész alkoholos készítmény alkoholnak ellenálló gyógyászati termékek, gyógyászati kellékek és mindenféle felület gyorsfertőtlenítéséhez.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- alkoholnak ellenálló gyógyászati termékek gyorsfertőtlenítése
- alkoholnak ellenálló gyógyászati kellékek és mindenféle felület fertőtlenítése és tisztítása a biocid irányvonalnak megf.

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK CSE

250 ml	szórófejes palack	30
1 L	Descoflex palack	10
5 L	kanna	3
10 L	kanna	1
1 X 120 Stck.	Spenderdose	12
1 X 120 Stck.	Nachfüllpack	12

ADAGOLÁS/BEHATÁSI IDŐK

baktericid beleértve MRSA, fungicid VAH/DGHM megf.	konc.	1 perc
Tbc	konc.	1 perc

hatékony burkos vírusokkal szemben beleértve HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (korlátozottan virucid az RKI megf.) konc. 30 Sek.

HATÓANYAG 100 G-BAN

38,9 g etanol, 0,1 g etándiol, 0,05 g didecil-dimetil-ammónium-klorid

DESCOCEPT AF WIPES

alkoholos gyorsfertőtlenítő kendők

- ✓ dermatológiailag tesztelt
- ✓ aldehidmentes
- ✓ fenolmentes



- aldehidmentes gyorsfertőtlenítő kendők friss illattal
- átfogó hatékonyság, beleértve a Norovírusokat
- bőrbarát, dermatológiailag tesztelt



DESOTEX PREMIUM VLIES

CE 0482

Használatra kész alkoholos gyorsfertőtlenítő kendők alkoholnak ellenálló gyógyászati termékek és mindenféle felület gyorsfertőtlenítéséhez. Különösen olyan területekre, melyeken gyors behatásra van szükség

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- alkoholnak ellenálló gyógyászati termékek gyorsfertőtlenítése
- alkoholnak ellenálló gyógyászati kellékek és mindenféle felület fertőtlenítése és tisztítása a biocid irányvonalnak megf.

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK CSE

1 X 120 db.	adagolócsomagolás	12
1 X 120 db.	utántöltő csomag	12
a kendők mérete: 14 x 20 cm		

ADAGOLÁS/BEHATÁSI IDŐK

baktericid beleértve MRSA, fungicid VAH/DGHM megf.	konc.	1 perc
Tbc	konc.	1 perc

Aspergillus niger konc. 30 perc

hatékony burkos vírusokkal szemben beleértve HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (korlátozottan virucid az RKI megf.)

	konc.	30 mp
Rota-Viren	konc.	1 perc
Adeno-Viren	konc.	1 perc

DESCOSEPT AF

alkoholos gyorsfertőtlenítő

- ✓ dermatológiailag tesztelt
- ✓ aldehydmentes
- ✓ fenolmentes



- aldehydmentes gyorsfertőtlenítő friss illattal
- átfogó hatékonyság, beleértve a Norovírusokat
- bőrbarát

Használatra kész alkoholos készítmény alkoholnak ellenálló gyógyászati termékek, gyógyászati kellékek és mindenféle felület gyorsfertőtlenítéséhez. Különösen nehezen elérhető felületekre, illetve olyan területekre, melyeken gyors behatásra van szükség. A DESCOSEPT AF aldehyd- és fenolmentes, különösen friss illatú és bőrbarát, amit dermatológiailag is igazoltak. Aldehydmentes kialakítása miatt az elszíneződések a DESCOSEPT AF használata után szinte kizártak.

Átfogó hatékonyság a vírusokkal szemben, beleértve a Norovírusokat.

A DESCOSEPT AF speciális szórófejjel fertőtlenítő habként is alkalmazható.

Megfelel az európai biocid irányvonalnak az ÖGHMP irányvonalnak megfelelően tanúsított.



habként is
alkalmazható

CE 0482

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- alkoholnak ellenálló gyógyászati termékek gyorsfertőtlenítése
- alkoholnak ellenálló gyógyászati kellékek és mindenféle felület fertőtlenítése és tisztítása a biocid irányvonalnak megf.

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK CSE

500 ml	öblös palack	20
1 L	Descoflex palack	10
5 L	kanna	3
10 L	kanna	1

ADAGOLÁS/BEHATÁSI IDŐK

baktericid beleértve MRSA, fungicid VAH/DGHH megf.	konc.	1 perc
Tbc	konc.	1 perc
Aspergillus niger	konc.	30 perc
hatékony burkos vírusokkal szemben beleértve HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (korlátozottan virucid az RKI megf.)	konc.	30 mp.
Rotavírusok	konc.	1 perc
Adenovírusok	konc.	1 perc
Norovírusok (MNV)	konc.	5 perc

HATÓANYAG 100 G-BAN

42,0 g etanol, 0,05 g didecil-dimetil-ammónium-klorid



CLEANISEPT® WIPES

alkoholmentes gyorsfertőtlenítő kendők

- alkoholmentes fertőtlenítő kendők ultrahangos vizsgáló fejekhez
- gyorsan hat, Papovavírusok ellen is
- különösen anyagbarát

Gyorsfertőtlenítő és tisztító kendők alkoholra érzékeny gyógyászati termékekhez, gyógyászati kellékekhez, illetve más alkoholra érzékeny felületekhez.

A CLEANISEPT® WIPES a klasszikus doboz/újrátölthető változat mellett nagyobb Maxi-kendőként praktikus, újrazárható kihúzható csomagolásban is kapható.

Különösen ajánlott hüvelyi és hasi vizsgálatoknál használt ultrahangos vizsgáló fejekhez:

Évekig nem létezett praktikus megoldás a hüvelyi és hasi vizsgálatoknál használt ultrahangos vizsgáló fejek gyors fertőtlenítő tisztítására.

A napi gyakorlatban a következő problémák lépnek fel:

- öblítő fertőtlenítést vizsgálatok között a legtöbb egészségügyi létesítményben időhiány miatt nem végeznek (az eszközfertőtlenítő szerek hosszú hatóideje, illetve a körülményes előkészítő eljárás miatt)
- a gyakran használt alkoholos gyorsfertőtlenítő kendők néhány esetben a vizsgálófejek anyagkárosodásához vezethetnek

A CLEANISEPT® WIPES az első olyan termék, mely praktikus megoldást kínál az ultrahangos fejek gyors fertőtlenítő tisztításához a következő előnyökkel:

- a bevezető elem, illetve az ultrahangos fej gyors és praktikus törölő fertőtlenítése vizsgálatok között
- nagy anyagbarátság az alkoholmentes kialakításnak köszönhetően
- gyors baktericid, fungicid és virucid hatás a HBV/HIV/HCV/ Vaccinia/BVDV burkos vírusokkal, a Herpeszvírusokkal, illetve a nem burkos Rota- és Papovavírusokkal szemben

A CLEANISEPT® WIPES LIQUID impregnáló folyadék színezőanyag- és parfümmentes, s szerepel a VAH, DGHM, ÖGHMP, valamint koncentrátumként a DVG listáján.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- alkoholra érzékeny gyógyászati termékek, különösen ultrahangos fejek gyorsfertőtlenítése
- bármely felületek alkoholmentes gyorsfertőtlenítése a biocid irányvonalnak megf.

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK CSE

1 x	100 db.	adagolócsomagolás	12
1 x	100 db.	utántöltő csomag	12
		a kendők mérete: 14 x 20 cm	
1 x	80 db.	Maxi-csomagolás	12
		Tuchgröße 20 x 22 cm	

- ✓ alkoholmentes
- ✓ aldehidmentes
- ✓ fenolmentes
- ✓ dermatológiailag tesztelt



maxi

Kendő mérete:

20 x 22 cm!

CE 0482



a következő gyártók ultrahangos jeladó fejainke fertőtlenítésére jóváhagyott

TOSHIBA | SIEMENS | PHILIPS

SHIMADZU | SONOACE | ALOKA

GE | @saote



ADAGOLÁS/BEHATÁSI IDŐK

baktericid beleértve MRSA, fungicid VAH/DGHM megf.	konc.	1 perc
hatékony burkos vírusokkal szemben beleértve HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (korlátozottan virucid az RKI megf.)	konz.	30 mp.
Rotavírusok	konc.	30 mp.
Papova-/Polyomavírusok	konc.	2 perc

HATÓANYAG 100 G-BAN

0,25 g didecil-dimetil-ammónium-klorid
0,5 g alkil-benzil-dimetil-ammónium-klorid

ECO WIPES

Vlieskendő adagolórendszerek felületi fertőtlenítésre

- minden felületfertőtlenítő szer felvitására
- újratölthető adagolórendszer
- a hatóanyag jó eloszlása a felületen

Az ECO WIPES száraz törölkendőket fertőtlenítőszer felvitására a felületek és gyógyászati termékek gyors és egyszerű fertőtlenítésére és tisztítására. Kifejezetten felületfertőtlenítésre fejlesztették ki és alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható felületfertőtlenítő szerrel együtt történő fertőtlenítésre és tisztításra.

A gazdaságos
alternatíva!



CE

ECO WIPES (32 X 30 CM)

Egyedi csomagolás	Értékesítési egység	Cikkszám
1 csomag Eco Wipes, egyenként 100 lapos tekercs	3 x 1 tekercs	00-915-REW10003
1 csomag Eco Wipes, egyenként 100 lapos tekercs	6 x 1 tekercs	00-915-REW10006
1 csomag Eco Wipes, egyenként 50 lapos tekercs	3 x 1 tekercs	00-915-REW5003



- méret: 32 x 30 cm

ECO WIPES VLIESKENDŐ ADAGOLÓ

Egyedi csomagolás	Értékesítési egység	Cikkszám
Eco Wipes vlieskendő adagoló egy adagolóvödör, töltetlen	1 x 1 vödör	00-915-EEW001
Eco Wipes vlieskendő adagoló, raktári csomagolás 6 adagolóvödör, töltetlen	6 x 1 vödör	00-915-EEW002



Különböző zárófedelek a DESCO WIPES és az ECO WIPES vlieskendő adagolókhöz:

Amennyiben Ön különböző osztályokhoz vagy termékekhez eltérő vlieskendő adagolót szeretne használni, a következő választék áll rendelkezésére:

- kék fedél:
 - kék kihúzónyílás
 - fehér kihúzónyílás
- fehér fedél:
 - kék kihúzónyílás
 - fehér kihúzónyílás
 - zöld kihúzónyílás
 - piros kihúzónyílás
 - sárga kihúzónyílás





DESCO WIPES

Vlieskendő adagolórendszer felületfertőtlenítő szerekhez

A higiéniailag
kifogástalan megoldás!

- minden felületfertőtlenítő szer felvitására
- újratölthető adagolórendszer
- a fertőtlenítőszer optimális elosztatása



A DESCO WIPES száraz törőkendők fertőtlenítőszer felvitására, felületek és gyógyászati termékek gyors és egyszerű fertőtlenítésére és tisztítására készültek.

A DESCO WIPES kiváló minőségű, szinte szőszmentes vliesanyagból készül.

A DESCO WIPES minden kereskedelmi forgalomban kapható felületfertőtlenítő szerrel kompatibilis. Kiválóan oszlatják el a fertőtlenítőt és biztosítják a fertőtlenítendő felület kifogástalan benedvesítését.



A DESCO WIPES egy kizárólag erre a célra tervezett vlieskendő adagolórendszerből húzható ki. Kivétele egy nagyon praktikus, újrazárható adagolórendszerből történik.



A termék előnyei

Univerzálisan használható

- a DESCO WIPES minden területen használható felületi fertőtlenítésre és tisztításra.
- a DR. SCHUMACHER felületfertőtlenítő szerein kívül a DESCO WIPES más gyártók termékeivel is kombinálható.

Rendkívül gazdaságos

- lerövidíti a munka előkészítési idejét, mivel az alkalmazandó oldat egyszeri elkészítésével 100 fertőtlenítő eljárás végezhető anélkül, hogy új előkészítést, illetve a törőkendő új áztatását el kellene végezni.
- csökkenti a fertőtlenítőszer-fogyasztást, mivel kb. 2,5-3 liter alkalmazandó oldat elkészítésével 100 fertőtlenítő eljárás végezhető, az oldat használata pedig 28 napig biztosított.
- tanulmányok bizonyítják gazdaságosságát többször használatos kendőkkel szemben.

Higiéniailag kifogástalan megoldás

- az alkalmazandó oldatot zárt rendszer védi a külső fertőzésekkel és a párologással szemben.
- alkoholos gyorsfertőtlenítő szerek használatakor a helyiség levegőjének alkoholos gőzökkel való túlzott terhelését megakadályozza, mivel az oldatot nem kell permetezni.
- a válogatott vliesminőség kitűnően oszlatja el a fertőtlenítő oldatot, így biztosítva a fertőtlenítendő felület kifogástalan benedvesítését.

Nagyon praktikus

- igény szerint hosszabb hatóidejű gyorsfertőtlenítő szerekkel vagy fertőtlenítő szerekkel is használható.
- a DESCO WIPES használatra kész, ezért azonnali fertőtlenítésre alkalmas, a rendeltetésszerűen zárt vlieskendő adagolóval pedig akár 28 napig használható.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Felületi fertőtlenítőszerrel való benedvesítés után felületi fertőtlenítésre és tisztításra:

- gyógyászati létesítményekben, például kórházakban, gondozóotthonokban és orvosi praxisokban

- gyógyszeriparban és laborokban
- élelmiszeriparban és konyhákban besonders geeignet für:

Különösen alkalmas:

- pácienshez közeli felületeken, például éjjeliszekrények, ágyak, vizsgálóasztalok különösen elkülönítő szobákban, pl. MRSA-val fertőzött páciensek esetén

- minden munkafelületen

- olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre hálózati víz vagy a tisztító eszközök higiénikus előkészítése nem lehetséges

- nehezen hozzáférhető felületeken

DESCO WIPES VLIESKENDŐK

A DESCO WIPES vlieskendők két minőségben kaphatóak: DESCO WIPES DT és DESCO WIPES RT. Ellentétben sok más szokványos vlieminőséggel mindkét kendő mindkét irányban nagyon ellenálló a tenzidekkel szemben. A lyukacsos gyapjúszerkezet lehetővé teszi nagyobb folyadékmennyiségek felvételét, melyet a fertőtlenítés során eloszlat a felületen. Ezzel a felület optimálisan benedvesíthető a fertőtlenítő oldallal.

DESCO WIPES DT

A hatóanyag különösen jó eloszlása

A DESCO WIPES DT alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható felületfertőtlenítő szerrel együtt történő fertőtlenítésre és tisztításra. Kifejezetten felületfertőtlenítésre fejlesztették ki.

A DESCO WIPES DT esetén használt gyapjút vliest úgy fejlesztették ki, hogy a fertőtlenítőszer anyagát nem szívja be, hanem mindig megbízhatóan eloszlítja a felületen. Alkalmazástechnikai laborunk vizsgálatai szerint DESCO WIPES DT termékeink minden kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszer anyagát 100 %-ban eloszlítják a felületen. Ez a tulajdonság független attól, hogy a kendőket csak egy vagy akár 28 napja itatták át fertőtlenítőszerrel.

Ellenőrzött fertőtlenítő hatás

A VAH/DGFM gyakorlati teszt szerinti mikrobiológiai stabilitás, illetve fertőtlenítő hatás saját felületfertőtlenítő szereinkkel kapcsolatban szakvéleményekkel bizonyított.

DESCO WIPES DT (32 X 30 CM)

Egyedi csomagolás	Értékesítési egység	Cikkszám
1 csomag Desco Wipes DT, egyenként 100 lapos tekercs	3 x 1 tekercs	00-915-RD10003
1 csomag Desco Wipes DT, egyenként 100 lapos tekercs	6 x 1 tekercs	00-915-RD10006
1 csomag Desco Wipes DT, egyenként 50 lapos tekercs	3 x 1 tekercs	00-915-RD5003



- a hatóanyag különösen jó eloszlása
- kiváló minőségű, szőszmentes, lyukas Spunlace vliet



- kendőméret 32 x 30 cm

DESCO WIPES VLIESKENDŐ ADAGOLÓ

A DESCO WIPES a kizárólag erre a célra tervezett gyapjúkendő vlieskendő adagolóból húzható ki, mely teljesen szigetelt és újrazárható. Ezáltal a következő kendők védettek a kiszáradással szemben.


Polietilénből és polipropilénből áll, minden fertőtlenítő- és tisztítószernek ellenálló, öblítő mosogatógépben 60 °C-ig mosható. Sima és lágyan simuló felületével ezért problémamentesen használható manuális tisztításhoz is.



Egyedi csomagolás	Értékesítési egység	Cikkszám
Desco Wipes vlieskendő adagoló, egy adagolóvödör, töltetlen	1 x 1 vödör	00-915-E001
Desco Wipes vlieskendő adagoló, raktári csomagolás 6 adagolóvödör, töltetlen	6 x 1 vödör	00-915-E002
Desco Wipes fali adagoló	1 x tartó	00-902-EIM

- 32x30 cm-es kendőmérethez
- akár 3 l fertőtlenítőoldathoz



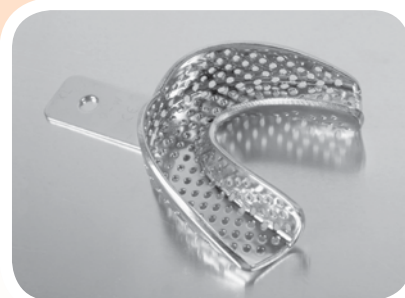

Speciális termékek a fogászatban

A fogászatban sok olyan tevékenység létezik, melyek a már bemutatott eszközökkel, felület- és szórófejes/törő fertőtlenítőszerrel lefedhetőek.

A különböző öntőminták, fúrók vagy szívóeszközök tisztítása és fertőtlenítése azonban különleges kihívások elé állítja a használt készítmények anyagbarátságát.

Ezért speciális készítményeket kínálunk, melyek megbízható védelmet biztosítanak a páciensek, a személyzet és az anyagok számára.



DESCOSUC

fertőtlenítőszer elszívóeszközökhöz

- ✓ aldehidmentes
- ✓ fenolmentes



- jó tisztító tulajdonságok
- különösen kevésbé habzik
- a szívóeszköz optimális anyagvédelme

CE 0482

Aldehyd- és fenolmentes, anyagkímélő fertőtlenítő- és tisztítószer mindenféle fogászati szívóberendezésekhez. Aktív klórtól mentes, ezért amalgám elválasztó szívóeszközökhöz is megfelel, mivel nem remobilizálja a higanyt.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
■ fogászati szívóeszközök (amalgám elválasztóval és anélkül) fertőtlenítése és tisztítása

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE
5 L kanna	3

ADAGOLÁS/BEHATÁSI IDŐK	
baktericid beleértve MRSA, fungicid VAH/DGHM megf.	2 % 15 perc 1 % 30 perc
Tbc	2 % 15 perc
hatékony burkos vírusokkal szemben baktericid beleértve MRSA, fungicid (korlátozottan virucid az RKI megf.) ≥ 10	

DESCOPRENT

fertőtlenítő-tisztítószer öntőformákhoz és fogtechnikai munkadarabokhoz

- ✓ fenolmentes
- ✓ formaldehydmentes



- nem befolyásolja a dimenziópontosságot
- nem károsítja a felületeket
- jó nedvesítő tulajdonságok, gondmentesen lemosható

CE 0482

Használatra kész, formaldehyd- és fenolmentes fertőtlenítő- és tisztítószer poliéter, szilikon, alginát és hidrokolloid fogtechnikai munkadarabokhoz és öntőformákhoz. Jó tisztítóhatás, feloldja a koszt, vért és a nyálát.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
■ fogászati öntőformák és fogtechnikai munkadarabok merülő kádban végzett fertőtlenítése és tisztítása

SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE
5 L kanna	3

ADAGOLÁS/BEHATÁSI IDŐK	
baktericid beleértve MRSA, fungicid VAH/DGHM megf.	konc. 5 perc
Tbc	konc. 15 perc
hatékony burkos vírusokkal szemben inkl. HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (korlátozottan virucid az RKI megf.)	
	konc. 1 perc
Rotavírusok	konc. 5 perc

DESCO BOHRERBAD

használatra kész fertőtlenítő tisztítószer rotációs eszközökhöz

- ✓ aldehidmentes
- ✓ fenolmentes



- jó korrózióvédelem
- ultrahangos kádban történő használatra
- kiváló tisztítóerő

CE 0482

Használatra kész, aldehid- és fenolmentes készítmény fúrók, marók, gyémántcsiszolók és más rotációs precíziós eszközök manuális öblítő fertőtlenítésére és tisztítására.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE	ADAGOLÁS/BEHATÁSI IDŐK
<ul style="list-style-type: none"> ■ fúrók, marók, gyémántcsiszolók és más rotációs precíziós eszközök manuális fertőtlenítésére és tisztítására 	2 L hordozható kanna 5 L kanna	6 3	baktericid beleértve Tbc, MRSA, fungicid VAH/DGHM megf. konc. 5 Min. hatékony burkos vírusokkal szemben beleértve HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (korlátozottan virucid az RKI megf.) konc. 5 Min.

ORANGE SOLVENT

speciális tisztítószer fogászati eszközökhöz

- ✓ alkáli- és szappanmentes



- természetes narancsolajból
- különösen jó tisztítóerő
- fáradtság nélkül tünteti el a fogászati anyagmaradékokat

CE

Használatra kész tisztítóoldat alginát- és cementmaradványok, valamint cink-eugenol foltok alapos eltávolításához a fogászati eszközökön és felszereléseken. Ragasztómaradványok, permanens markerek, illetve padlócsíkok eltüntetésére is alkalmas.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	SZÁLLÍTÁSI FORMÁK	CSE
<ul style="list-style-type: none"> ■ alginát- és cementmaradványok, valamint cink-eugenol foltok tisztítására fogászati eszközökön és felszereléseken 	250 ml PET palack 500 ml PET palack	9 6





Felhasználást segítő eszközök

A megfelelő adagolás döntő jelentőségű a fertőtlenítés sikerességében és megakadályozza a gazdaságtalan felhasználást.

A speciálisan termékprogramunkhoz optimalizált munkát segítő és adagoló eszközök biztos felhasználást és pontos adagolást biztosítanak fertőtlenítő és tisztító szereinkhez.



FALI ADAGOLÓ SP 500/SP 1000

Emelőkaros SP 500 és SP 1000 ml fali adagoló műanyag kivitelezésben; 500 vagy 1000 ml-es palackokhoz (átlátszó ablak kérésre).



FALI ADAGOLÓ AK 500/AK 1000

Autoklávozható emelőkaros AK 500 és 1000 Eurospender alumínium házzal, illetve rövid és hosszú nemesacél kezelőkarral.
500 vagy 1000 ml-es palackokhoz.
Kérésre hozzá illő zárható zárófedéllel.



FALI ADAGOLÓ SPE 500/1000

Emelőkaros SPE 500 és SPE 1000 fali adagoló műanyag kivitelezésben; 500 ml vagy 1000 ml palackhoz



AUTOMATA FERTŐTLENÍTŐSZER ADAGOLÓ

Az összes fontos fertőtlenítőszer gyártó 500 és 1000 ml-es fertőtlenítőszer palackjához illik.

A fali tartó erős, kiváló minőségű műanyagból készül és roller pumpával (jet-tippel), illetve cseppfogó edénnyel van felszerelve.

Az automatikusan adagolt mennyiség 1,5-6 ml közötti értékre állítható be. Az adagoló 4 AA elemmel dolgozik, melyek elérhetik akár a 40000 ciklust is.



A nemesacél pumpa eltávolítása az AK-1000 plus adagolóból



DESCOFLEX DOBOZ-TARTÓ DH

- doboztartó egyszerű falra, szekrényre, stb. való rögzítéshez
- minden szokványos fertőtlenítőkendő dobozához illik
- krómozott acél kivitelezés



DESCOFLEX MOBIL TARTÓ MH

- mobil tartó változatos ágyvázra, ápoló kocsira, stb. szerelhető akasztókkal
- 500 és 1000 ml-es palackokhoz illik
- krómozott acél kivitelezés

DESCOFLEX FALI TARTÓ WH

- fali tartó egyszerű falra, szekrényre, stb. való rögzítéshez
- 500 és 1000 ml-es palackokhoz illik
- krómozott acél kivitelezés

ADAGOLÓ ESZKÖZÖK

- 1000 ml-es adagoló palack 60 ml-es tartállyal
- kannához való adagoló pumpa 30 ml-es térfogattal, használható 2 l-es hordozható palackhoz, 5 vagy 10 l-es kannához, kérésre kisebb térfogatokhoz megfelelő (20 ml, 10 ml) darabbal
- kannacsapok 2 l-es hordozható palackhoz, 5 l-es, 10 l-es és 30 l-es kannához
- adagoló
- kézi szórófej
- habszóró fej



FREZÁTOR

Rotációs fogászati precíziós eszközökhöz
Űrtartalom 100 ml



FERTŐTLENÍTŐ KÁDAK

Fertőtlenítő kád gyógyászati eszközökhöz
1 l, 3 l, 4 l, 5 l, illetve 10 l hosszú endoszkópokhoz



A KÖZVETLEN ÚT HOZZÁNK

A helyi szerviztől az egyedi higiénia tanácsadáson át a képzési kínálatokig: Amennyiben érdeklődik a Dr. Schumacher termékei és szolgáltatásai iránt, vegye fel velünk a kapcsolatot. Szívesen tájékoztatjuk Önt helyi szaktanácsadónk személyéről!

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld

Tel.: +49 5664 9496-0
Fax: +49 5664 8444

Internet:
www.schumacher-online.com
E-mail:
post@schumacher-online.com

További információért, illetve termékeink biztonsági adatlapjáért és használati útmutatójáért látogasson el weboldalunkra www.drschumacher.hu

Szolgáltatásaink:

- ▶ minőségi termékek vonzó áron
- ▶ tanácsadás és a felhasználók oktatása helyben higiéniai szaktanácsadónk segítségével
- ▶ műszaki szerviz az adagoló gépekhez, illetve a gépi eszköz-előkészítéshez
- ▶ higiénia-management

Forgalmazó:
Dr. Schumacher – Sz&T Magyarország Kft.
Székhely / telephely:
1116 Budapest Kondorosi út 3.
Telefon: +36 (1) 278 0837
Fax: +36 (1) 278 0838
e-mail: info@drschemacher.hu



Dr. Schumacher -
Sz&T Magyarország Kft.