

voco

HIGHLIGHTS

Nagy teljesítményű kompozit
GrandioSO Unlimited –
4 mm-es univerzális kompozit
öt Cluster-Shade árnyalatban

Vitalitás és napi használat
A pulpa vitalitásának megőrzése
és pulpasapkázás bio anyaggal
MTA vpt (Vital Pulpa Terápia)

Jóízű
Profluorid Varnish + BioMin
a bioüveg az új nagyhatalom
a zománc erősítésére



GrandioSO Unlimited

4 mm-es univerzális kompozit öt Cluster-Shade árnyalatban

Amíg az esztétikus univerzális kompozitokat 2 mm-es lépésekben kell rétegezni és polimerizálni, ami kissé körülményessé teszi a használatukat, addig a bulk-fill kompozitok előnye, hogy akár 4 mm-es lépésekben is applikálhatók a kavitásba. Az elégtelen esztétikájuk miatt a bulk-fill kompozitokat általában csak a hátsó régióban használják. Az új univerzális GrandioSO Unlimited kompozittal a VOCO megoldotta ezt a problémát. Az esztétikus anyag 4 mm-es lépésekben vihető be a kavitásba, és mind az anterior, mind a poszterior régióban alkalmazható. Ennek eredményeként egyetlen tömöríthető univerzális kompozitra van csak szükség!

Cluster-Shade-Rendszer

Mivel a mindennapi zavartalan működéshez elegendő mindössze 5 árnyalatot raktáron tartani, jelentősen lecsökkentheti a készleteit.

Az egyszerűsített árnyalatrendszernek köszönhetően az 5 Cluster-Shade szín mind a 16 klasszikus VITA® árnyalatot képes lefedni.

GrandioSO Unlimited	A1				A2				A3				A3.5				A4			
VITA® classical	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4				

Nagy teljesítményű kompozit

Lenyűgöző, 91 tömeg %-os töltőanyag tartalmával a GrandioSO Unlimited új mércét állít fel a stabilitás és az erősség tekintetében a nagy teljesítményű kompozitok osztályában. Az alacsony, 1,44 térfogat %-os zsugorodás csökkenti az elégtelen széli záródás és az elszíneződés kialakulásának kockázatát és támogatja a legkiválóbb minőségű restaurációk készítését.



Testtcsomag

10 × 0,3 g Caps
(2 db mindegyikből × A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ 10 × Futurabond U SingleDose,
+ színkulcs

REF 6257

Megtakarítás
20%*

Készlet fecskendő

5 × 4,5 g fecskendő
(A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ színkulcs

REF 6258

Készlet Caps

75 × 0,3 g Caps
(15 db mindegyikből × A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ színkulcs

REF 6270

További kiszerezési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a www.voco.dental oldalon

A nagy teljesítményű kompozit

Univerzális

Anterior és poszterior régiókhoz

Legnagyobb stabilitás

91% töltőanyag-tartalom

5 klaszter árnyalat

Lefedi mind a 16 klasszikus VITA® árnyalatot

Nincs rétegezés

4 mm-es rétegvastagság

Kiváló esztétika

Kiváló polírozhatóság



MTA vpt

A pulpa vitalitásának megőrzése a napi praxisban –
biokompatibilis és monomermentes

A biokompatibilis, stabil és baktérium mentes pulpa lezárás elengedhetetlen a pulpa vitalitásának megőrzéséhez. Az MTA vpt-vel a VOCO ásványi trioxid aggregátumot kínál (MTA) olyan anyagot, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek. A Vitál Pulpa Terápia (VPT) keretén belül, az MTA vpt használható kavitás alábélelésre, indirekt és direkt pulpasapkázásra, valamint a pulpa kezeléséhez a vitál amputáció (részleges vagy teljes pulpotomia) során. A fogszuvasodás kezelésének részeként, kariesz maradványokat tartalmazó dentin is megbízhatóan lezárható az MTA vpt-vel.

Az MTA vpt a kötési fázisban kalcium- és hidroxidionokat szabadít fel, amelyek serkentik a szervezet saját regenerációs folyamatait és a terciér dentin képződését. Az így létrejövő magas pH-érték bakteriosztatikus és remineralizációt támogató hatásáról ismert. Így módon az MTA vpt stabil és baktériumzáró védőréteget hoz létre – optimális alapot a pulpa vitalitásának fenntartásához.

- MTA a mindennapi klinikai praxishoz – biokompatibilis, monomer mentes
- Magas pH-érték (12) – bakteriosztatikus hatásáról ismert
- Kalcium- és hidroxidionok felszabadítása – elősegíti a harmadlagos dentin képződését és a remineralizációt
- Megbízható pulpavédelem – mineralizálódik, és baktériumálló réteget képez
- Időtakarékos – a nyomás nélküli rétegezésnek köszönhetően azonnal folytatható a munkaművelet
- Könnyű kezelhetőség – applikálás standard műszerekkel vagy közvetlenül a kapszulából
- Nem okoz elszíneződést – bizmut-oxidtól és vasvegyületektől mentes
- Radiopák (290 % Al)



MTA vpt

kézi keverés
10 g por + 10 ml folyadék

REF 1645

MTA vpt AC

25 db. applikációs kapszula

REF 1646



Vonzó árú MTA anyag a napi praxishoz

Alábélelő cement minden
helyreállító anyaghoz

Indirekt
pulpasapkázás

Direkt
pulpasapkázás

Pulpa kezelés
pulpotómiát követően





Bifix Temp fluorescent

Kettős kötésű, kompozit alapú
ideiglenes ragasztóanyag

Fogszerű, áttetsző árnyalatával a Bifix Temp fluoreszcens harmonikusan illeszkedik az ideiglenes helyreállításhoz. Az esztétika természetes fényben változatlan marad és még UVA fényben sem látszik át a fluoreszcencia az ideiglenes restauráción. UVA fényben az anyag nagyon intenzíven fluoreszkál, így az ideiglenes helyreállítás eltávolítása után könnyebben észlelhető és eltávolítható a legkisebb anyagmaradvány is. A későbbiekben pedig segíti a végleges helyreállítás pontos elhelyezését. Ez az előny önmagában is hatékonyabbá teszi a szokásos, időigényes befejező munkafolyamatot.



Bifix Temp fluorescent

5 ml QuickMix fecskendő
+ tartozékok

REF 1056

AlignerFlow LC

Fluoreszcens kompozit alignerek rögzítéséhez

A fogászati és fogszabályzó kezelések részét képező aligner terápiák, bizonyos esetekben, fogra kerülő segédelemeket alkalmaznak. Az aligner segédelemek pontos kivitelezéséhez speciális kompozitokra van szükség. Az AlignerFlow LC révén a VOCO kifejezetten erre a célra kínálja a fluoreszcens tulajdonsággal rendelkező nano-hibrid kompozitot.

Az UVA fény alatt ellenőrizhetjük az attachmenteket, vagy az eltávolítás után pontosan azonosíthatóak az anyagmaradványok és óvatosan eltávolíthatók a zománcról.



AlignerFlow LC

2 × 2 g fecskendő A1

REF 1526

2 × 2 g fecskendő A2

REF 1527

2 × 2 g fecskendő A3

REF 1528

Azonnali előnyök:

- Tökéletes folyási jellemzők, pontos alkalmazás
- Fotopolimerizálás az átlátszó sablonon keresztül
- Stabil és kopásálló a teljes kezelési időszak alatt

Linguális retainerek



Attachmentek



Forrás: Dr. Montse Galiano, Egyesült Királyság



Clip F fluorescent

Fényre keményedő tömőanyag
ideiglenes helyreállításokhoz

A Clip F fluorescent lenyűgöz a sokoldalúságával és a felhasználóbarát jellegével. Az egykomponensű anyag könnyen behelyezhető és formázható. Fényre keményedő tulajdonságának köszönhetően a Clip F fluorescent azonnal applikálható és nyálálló. Elasztikus tulajdonságai anyagmaradványoktól mentes, tiszta és sérülés mentes preparációs széleket biztosítanak a legtöbb esetben. Az UVA fény alatt a kis feleslegek és anyagmaradványok kezelése lényegesen könnyebb: különösen vékony, szabad szemmel nem könnyen látható anyag vastagságok esetében. A Clip F fluorescent alkalmas minden típusú ideiglenes tömésre, lezárásra és helyreállításra, beleértve az onlay/inlay technikát is.



Clip F fluorescent

2 x 4 g fecskendő

REF 1288

Rebilda DC fluorescent

Az első csomkfelépítő és csapberagasztó rendszer
aktiválható fluoreszcenciával

A Rebilda DC fluorescent kettős kötési, kompozit alapú csomkfelépítő és beragasztórendszerrel a VOCO a Rebilda család új tagját hozta forgalomba. A Rebilda termékeket évtizedek óta sikeresen alkalmazzák világszerte a fogorvosi praxisokban nagy megbízhatóságuk, különösen pedig dentinszerű tulajdonságaik miatt. Most egy fluoreszcens változatot adtunk a meglévő dentin, fehér és kék árnyalatok mellé, ismét bizonyítva a VOCO innovációs képességét.



Patron 50 g
fluoreszcens dentin,
+ tartozékok

REF 1399

QuickMix fecskendő 10 g,
fluoreszcens dentin,
+ tartozékok

REF 1406

Fluoreszkál UVA fényben

Jól láthatók az anyagfelesleg
és a csomkfelépítés határai
mély, subgingivális szinten is

Könnyű kezelhetőség

Dentinként csiszolható
Folyékony konzisztencia –
tökéletes adaptálhatóság

Kiváló esztétika

Természetes fényben dentin
színű, ezért ideális esztétikus
helyreállításokhoz

Kettős kötés

Használható gyökércsatornában
a gyökércsapok beragasztására
(pl. Rebilda Post)



Profluorid Varnish + BioMin

Jelentős mértékben megkeményíti a meggyengült zománcot – négy kellemes ízben

A már jól bevált fluorid lakk – VOCO Profluorid Varnish – bioüveg fejlesztést kapott BioMin-ből. Ez a láthatatlan bioüveg nyál jelenlétében feloldódik és kalcium- és foszfátiókat szabadít fel, amelyek elősegítik a fogak remineralizációját.

A lakkból származó fluoriddal kombinálva kristályos szerkezeteket hoz létre a fog felszínén, amelyek jelentősen megkeményítik a például a savaktól legyengített zománcot.

Igazi kettős védelem a jól ismert deszenzibilizációval!



Megtakarítás
25%*

200 × 0,40 ml SingleDose

Karamell	REF 2276
Cseresznye	REF 2277
Menta	REF 2278
Rágógumi	REF 2279

50 × 0,40 ml SingleDose

Karamell	REF 2270
Cseresznye	REF 2271
Menta	REF 2272
Rágógumi	REF 2273

10 ml Tubus

Karamell	REF 2266
Cseresznye	REF 2267
Menta	REF 2268
Rágógumi	REF 2269

Mixed Flavour

48 × 0,40 ml SingleDose
válogatás: Karamell, Cseresznye, Menta, Rágógumi
REF 2274

Profluorid Varnish

Fluorid tartalmú lakk érzékenység kezelésére (5 % NaF)

A túlérzékenységet elsősorban a nyitott dentin tubulusok okozzák, ezért a kezelés célja ezeknek a tubulusoknak a lezárása. A Profluorid Varnish fluoridtartalmú lakk, amely a fognyaki vagy az üreg előkészítése után megnyílt dentin tubulusokat hatékonyan lezárja.

Azonnali előnyök:

- Gyors deszenzibilizáció és fluoridleadás (22.600 ppm fluorid)
- Könnyen applikálható – nyálálló
- Hét kellemes ízben kapható
- Gazdaságosan, vékony rétegben applikálható, nagyon előnyös

10 ml Tubus

Dinnye	REF 1267	Karamell	REF 2232
Menta	REF 2234	Cseresznye	REF 2233
Pina Colada	REF 2237	Cola Lime	REF 2236

200 × 0,40 ml SingleDose

Dinnye	REF 1271	Rágógumi	REF 2239
Menta	REF 2231	Cseresznye	REF 2230
Pina Colada	REF 2243	Cola Lime	REF 2241
Karamell	REF 2229		



Megtakarítás
25%*

5 × 1,70 ml

Patron

Dinnye	REF 2235
--------	----------

Mixed Flavour

4 × 10 ml Tubus
válogatás: Menta, Dinnye, Cseresznye és Karamell
REF 2971

Futurabond U

Praktikus *SingleDose* kiszerezésben

A Futurabond U mögött egy kiterjedt kutatási és fejlesztési folyamat áll, amelynek az egyik célja: olyan univerzális ragasztót kínálni, a felhasználóknak, amely megbízhatóságával és más előnyeivel feleslegessé teszi a fogászati gyakorlatban más ragasztó rendszerek használatát.

A Futurabond U új szabványokat állít be a kötési szilárdsággal, különösen pedig a rugalmas és sokoldalú felhasználhatóságával.

50 *SingleDose*

50 × Futurabond U
+ tartozékok

REF 1571

200 *SingleDose*

200 × Futurabond U
+ tartozékok

REF 1572

Megtakarítás
12%*



Grandio blocs & Grandio disc

Nano-kerámia hibrid CAD/CAM anyag végleges helyreállításokhoz vagy vázak leplezéséhez

A Grandio blocs /Grandio disc lenyűgöznek fizikai értékükkel a rugalmasság, szilárdság terén, és magas, 86 tömeg %-os töltőanyag-tartalommal rendelkeznek. Ezek miatt közelebb állnak a természetes fogakhoz, mint bármely más indirekt helyreállításhoz használt anyag. A Grandio blocs /Grandio disc a leginkább ajánlott anyag, és felülmúlja a hagyományos restaurációs anyagokat.

A termékeket könnyen lehet intraorálisan finírozni és fényesre polírozni.



Grandio disc multicolor

1 × 15 mm (ø 98 mm)
Például:

A2 REF 6217
A3 REF 6218

További kiszerezési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a www.voco.dental oldalon

Elérhető
PlanMill®-
hez is




Grandio blocs

5 × no. 12 LT/HT
REF lásd a táblázatban

Grandio blocs

5 × no. 14L LT/HT
REF lásd a táblázatban

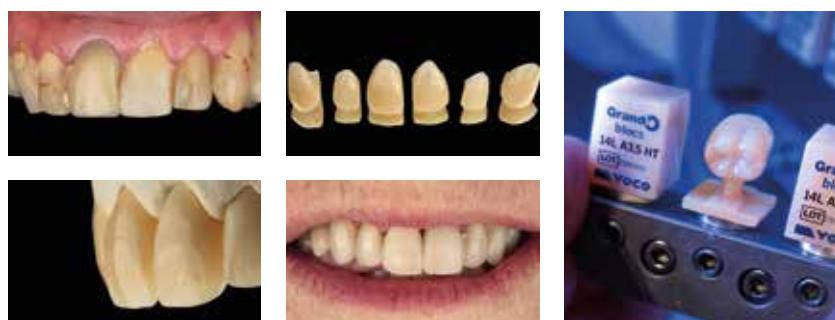

Forrás: Dr. Felipe Moura, Brazília

	Anterior területre							Poszterior területre			
	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
No. 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
No. 14L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030

Bifix Veneer LC


Biztonságos és esztétikus – héjak ragasztása optimalizált munkafolyamattal



A Bifix Veneer LC különösen esztétikus fényre kötő nano-hibrid ragasztókompozit, 81 tömeg %-os töltöttségével kifejezetten a kompozitból vagy kerámiából készült héjak, inlay-k, onlay-k egyszerű és biztonságos ragasztására lett kifejlesztve.

Az átlátszó szín-konceptió **három** árnyalattal (**világos, tiszta és meleg**) teszi a héjak felhelyezését egyszerűvé, amely pozitív hatással van az esztétikai végeredményre. A pontosan összehangolt próbapasztáknak köszönhetően könnyű kiválasztani a megfelelő árnyalatot, így a végeredmény előre ellenőrizhető.

Intuitív és hatékony szín-konceptió a maximális esztétikai siker érdekében

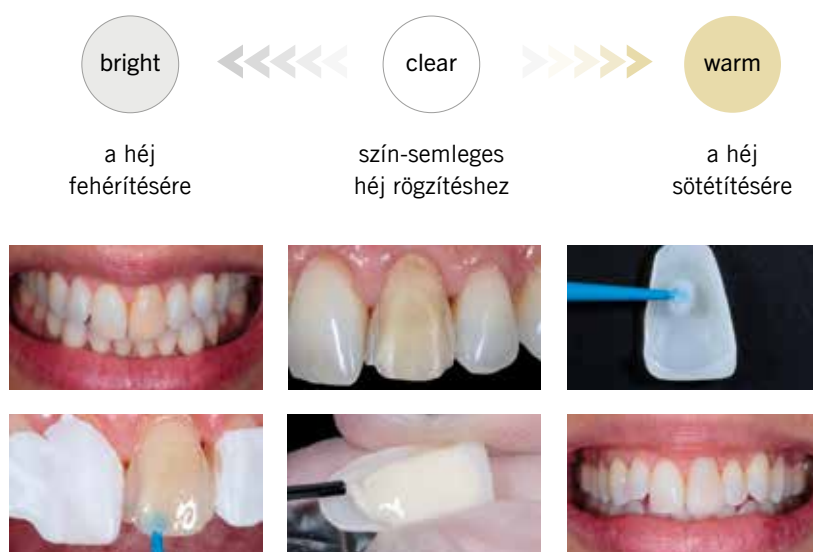

Forrás: Prof. Carlos Torres, Brazília

Az itt bemutatott VOCO Highlights megrendeléséhez kérjük, forduljon fogászati kereskedőjéhez vagy VOCO fogászati tanácsadójához.

*egyedi vásárláshoz képest

Az ajánlatok csak a résztvevő kiskereskedelmi partnereknél érvényesek. A speciális árakat a depók mindig figyelembe veszik. A hibák és hiányosságok kivételt képeznek. Nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.



Bifix Veneer Set

3 × 2 g fecskendő Bifix Veneer LC
3 × 2,5 g fecskendő Bifix Veneer Try-In
(bright, clear, warm)
+ tartozékok

REF 1428

Megtakarítás
20%*

Bifix Veneer System-Set

3 × 2 g fecskendő Bifix Veneer LC
3 × 2,5 g fecskendő Bifix Veneer Try-In (bright, clear, warm)
2 ml fecskendő Vococid
20 db SingleDose Futurabond U
20 db SingleDose Ceramic Bond
10 db Sticky Tim
+ tartozékok

REF 1429

További kiszerezési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a www.voco.dental oldalon

VOCO GmbH

Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Németország



voco.dental