

ELITE MODEL

THIXOTROPIC

GESSO TIPO 3 PER MODELLI IN GENERE E ANTAGONISTI
TYPE 3 DENTAL STONE FOR ANTAGONISTS AND MODELS IN GENERAL
HARTGIPS , KLASSE 3, FÜR SITUATIONS- UND GEGENBISSMODELLE
PLÂTRE TYPE 3 POUR MODÈLES EN GÉNÉRAL ET D'ANTAGONISTES
YESO TIPO 3 PARA MODELOS EN GENERAL Y ANTAGONISTAS


WATER / POWDER RATIO	30 ml / 100 g
WORKING TIME	7'
SETTING TIME (VICAT)*	12'
SETTING EXPANSION 2h*	0.04 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	31 MPa

ELITE MODEL FAST


THIXOTROPIC

GESSO RAPIDO TIPO 3 PER MODELLI IN GENERE E ANTAGONISTI
TYPE 3 FAST DENTAL STONE FOR ANTAGONISTS AND MODELS IN GENERAL
SCHNELLABBINDENDER HARTGIPS, KLASSE 3, FÜR SITUATIONS- UND GEGENBISSMODELLE
PLÂTRE RAPIDE TYPE 3 POUR MODÈLES EN GÉNÉRAL ET D'ANTAGONISTES
YESO RÁPIDO TIPO 3 PARA MODELOS EN GENERAL Y ANTAGONISTAS


WATER / POWDER RATIO	30 ml / 100 g
WORKING TIME	4'
SETTING TIME (VICAT)*	8'
SETTING EXPANSION 2h*	0.1 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	36 MPa

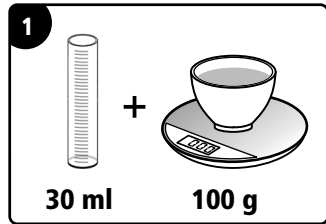


Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

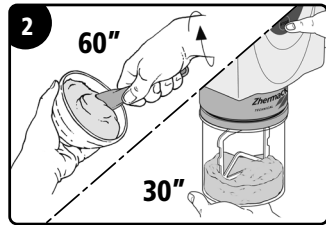

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos

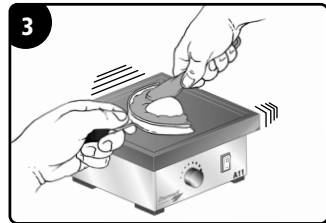

Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración

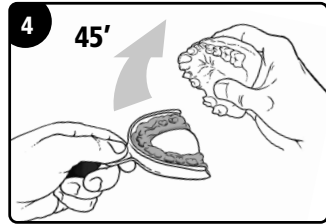


Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

ELITE ARTI


THIXOTROPIC

GESSO TIPO 3 PER ARTICOLATORI
TYPE 3 ARTICULATING DENTAL STONE
ARTIKULATIONSGIPS, KLASSE 3
PLÂTRE TYPE 3 POUR ARTICULATEURS
YESO TIPO 3 PARA ARTICULADORES


WATER / POWDER RATIO	30 ml / 100 g
WORKING TIME	3'
SETTING TIME (VICAT)*	5'
SETTING EXPANSION 2h*	0.02 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	26 MPa

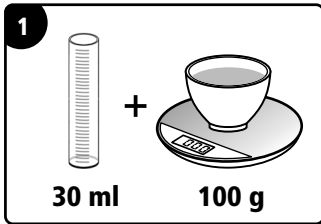

Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

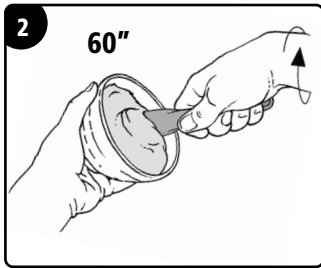

Miscelare per 60 secondi
Mix for 60 seconds
60 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60 secondes
Mezclar entro 60 segundos

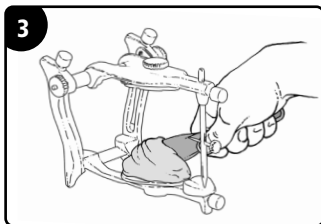



Applicare sull'articolatore
Put on articulator
In den Artikulator einsetzen
Appliquer sur l'articulateur
Aplicar en el articulador

ELITE ARTI FAST


THIXOTROPIC

GESSO RAPIDO TIPO 3 PER ARTICOLATORI
TYPE 3 FAST SETTING ARTICULATING DENTAL STONE
SCHNELLABBINDENDER ARTIKULATIONSGIPS, KLASSE 3
PLÂTRE RAPIDE TYPE 3 POUR ARTICULATEURS
YESO RÁPIDO TIPO 3 PARA ARTICULADORES

WATER / POWDER RATIO	30 ml / 100 g
WORKING TIME	2'
SETTING TIME (VICAT)*	3'
SETTING EXPANSION 2h*	0.02 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	26 MPa

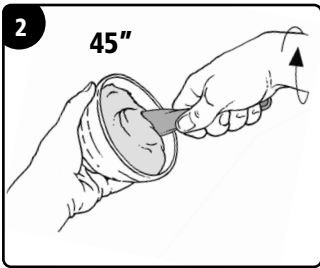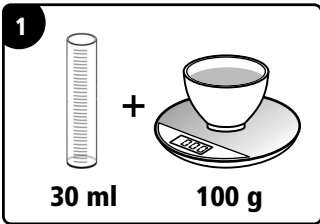

Miscelare per 45 secondi
Mix for 45 seconds
45 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 45 secondes
Mezclar entro 45 segundos

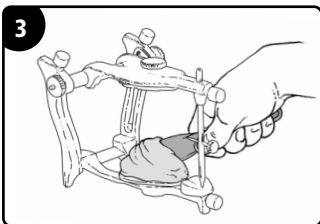


ELITE ORTHO


THIXOTROPIC

GESSO TIPO 3 PER MODELLI IN ORTODONZIA
TYPE 3 DENTAL STONE FOR ORTHODONTIC MODELS
KFO GIPS, KLASSE 3
PLÂTRE TYPE 3 POUR MODÈLES EN ORTHODONTIE
YESO TIPO 3 PARA MODELOS, EN ORTODONCIA


WATER / POWDER RATIO	24 ml / 100 g
WORKING TIME	7'
SETTING TIME (VICAT)*	14'
SETTING EXPANSION 2h*	0.04 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	32 MPa

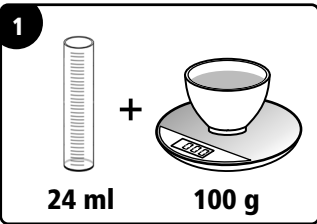


Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

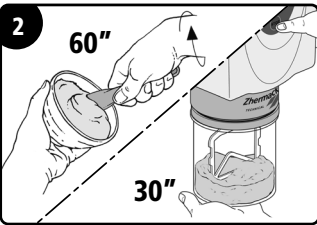

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos

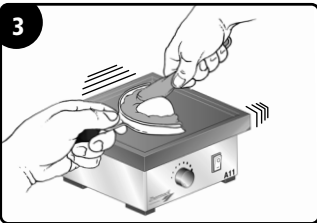

Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración

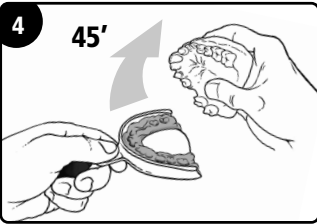

Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción



ELITE DENTAL STONES

type 4

elite master

elite rock

thixotropic

elite rock fast

thixotropic

elite stone

thixotropic

elite stone fast

thixotropic

elite base

type 3

elite model

thixotropic

elite model fast

thixotropic

elite arti

thixotropic

elite arti fast

thixotropic

elite ortho

thixotropic

*testato in conformità alla ISO 6873 - *test complies with ISO 6873 - *test conforme à la norme ISO 6873 - *la prueba cumple con la norma ISO 6873 - *Der Test erfüllt die Norm ISO 6873 - IT_I tempi indicati possono variare in base alla temperatura ambientale e alla tecnica di miscelazione. - EN_The times indicated may vary according to room temperature and mixing technique. - DE_Die angegebenen Zeiten können je nach Umgebungstemperatur und Anmischverfahren abweichen. - FR_Les temps indiqués peuvent varier en fonction de la température ambiante et de la technique de mélange. - ES_Tiempos indicativos sujetos a variación según la temperatura ambiente y la técnica de mezcla. IT_Gesso per uso dentale. Il prodotto è sensibile all'umidità, conservare in luogo asciutto. EN_Dental stone. This product is humidity-sensitive, store in a dry place. FR_Plâtre à usage dentaire. Le produit est sensible à l'humidité et doit être conservé dans un environnement sec. ES_Yeso de uso dental. Producto sensible a la humedad: conservarlo en lugar seco. DE_Gips für den dentalen Gebrauch. Das Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich, an einem trockenen Ort aufbewahren.



ELITE MASTER

GESSO EXTRA DURO TIPO 4 RINFORZATO CON RESINA PER MONCONI IN PROTESI FISSA E IMPLANTOLOGIA
TYPE 4 EXTRA HARD RESIN REINFORCED DENTAL DIE STONE FOR FIXED PROSTHESIS AND IMPLANTS
SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR STUMPFMODELLE UND IMPLANTATARBEITEN
PLÂTRE EXTRA DUR TYPE 4 RENFORCÉ AVEC RÉSINE POUR MOIGNONS EN PROTHÈSE FIXE ET IMPLANTOLOGIE
YESO TIPO 4 EXTRA DURO REFORZADO CON RESINA PARA MUÑONES, EN PRÓTESIS FIJA E IMPLANTOLOGÍA

WATER / POWDER RATIO	21 ml / 100 g
WORKING TIME	12'
SETTING TIME (VICAT)*	14'
SETTING EXPANSION 2h*	0.08 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	50 MPa

1




21 ml100 g

Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

2

60"

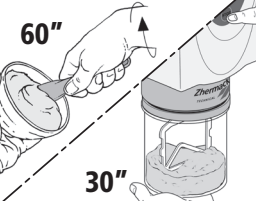

30"

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos


3



Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración

4

45'

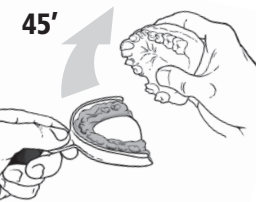

Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

ELITE ROCK

THIXOTROPIC

GESSO EXTRA DURO TIPO 4 PER MONCONI IN PROTESI FISSA
TYPE 4 EXTRA HARD DENTAL DIE STONE FOR FIXED PROSTHESIS
SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR STUMPFMO-DELLE
PLÂTRE EXTRA DUR TYPE 4 POUR MOIGNONS EN PROTHÈSE FIXE
YESO EXTRA DURO TIPO 4 PARA MUÑONES, EN PRÓTESIS FIJAS

WATER / POWDER RATIO	20 ml / 100 g
WORKING TIME	12'
SETTING TIME (VICAT)*	14'
SETTING EXPANSION 2h*	0.08 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	52 MPa

1




20 ml100 g

Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

2

60"

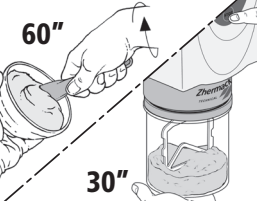

30"

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos


3



Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración

4

45'

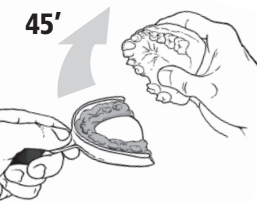

Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

ELITE ROCK FAST

THIXOTROPIC

GESSO RAPIDO EXTRA DURO TIPO 4 PER MONCONI IN PROTESI FISSA
TYPE 4 EXTRA HARD FAST DENTAL DIE STONE FOR FIXED PROSTHESIS
SCHNELLABBINDENDER SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR STUMPFMODELLE
PLÂTRE RAPIDE EXTRA DUR TYPE 4 POUR MOIGNONS EN PROTHÈSE FIXE
YESO RÁPIDO EXTRA DURO TIPO 4 PARA MUÑONES, EN PRÓTESIS FIJAS

WATER / POWDER RATIO	20 ml / 100 g
WORKING TIME	5'
SETTING TIME (VICAT)*	9'
SETTING EXPANSION 2h*	0.08 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	52 MPa

1




20 ml100 g

Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

2

60"

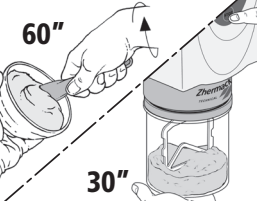

30"

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos


3



Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración

4

25'

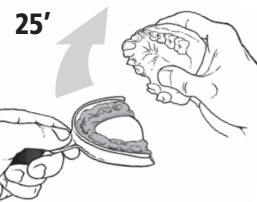

Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

ELITE STONE

THIXOTROPIC

GESSO TIPO 4 PER MODELLI MASTER IN PROTESI RIMOVIBILE
TYPE 4 DENTAL DIE STONE FOR MASTER MODELS IN REMOVABLE PROSTHESIS
SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR HERAUSNEHMBARE PROTHESEN
PLÂTRE TYPE 4 POUR MODÈLES MASTER EN PROTHÈSE AMOVIBLE
YESO TIPO 4 PARA MODELOS MASTER EN PRÓTESIS REMOVIBLES

WATER / POWDER RATIO	25 ml / 100 g
WORKING TIME	8'
SETTING TIME (VICAT)*	14'
SETTING EXPANSION 2h*	0.08 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	42 MPa

1




25 ml100 g

Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

2

60"

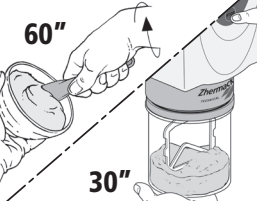

30"

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos


3



Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración

4

45'

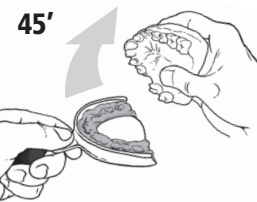

Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

ELITE STONE FAST

THIXOTROPIC

GESSO RAPIDO TIPO 4 PER MODELLI MASTER IN PROTESI RIMOVIBILE
TYPE 4 FAST DENTAL DIE STONE FOR MASTER MODELS IN REMOVABLE PROSTHESIS
SCHNELLABBINDENDER SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR HERAUSNEHMBARE PROTHESEN
PLÂTRE RAPIDE TYPE 4 POUR PROTHÈSE AMOVIBLE ET STELLITES
YESO RÁPIDO TIPO 4 PARA MODELOS MASTER EN PRÓTESIS REMOVIBLES

WATER / POWDER RATIO	25 ml / 100 g
WORKING TIME	3' 30"
SETTING TIME (VICAT)*	6'
SETTING EXPANSION 2h*	0.09 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	42 MPa

1




25 ml100 g

Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

2

60"

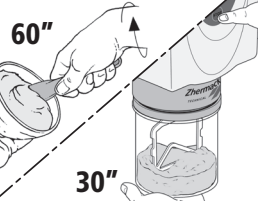

30"

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos


3



Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración

4

approx. 10'

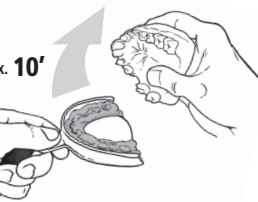

Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

ELITE BASE

GESSO TIPO 4 PER BASI
TYPE 4 DENTAL STONE FOR BASES
FLÜSSIGER SOCKELGIPS, KLASSE 4
PLÂTRE TYPE 4 POUR SOCLES
YESO TIPO 4 PARA BASES

WATER / POWDER RATIO	23 ml / 100 g
WORKING TIME	5'
SETTING TIME (VICAT)*	18'
SETTING EXPANSION 2h*	0.05 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	40 MPa

1




23 ml100 g

Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

2

60"

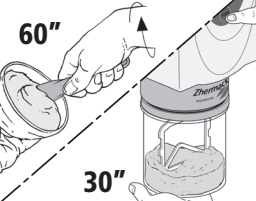

30"

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos


3



Colare nello stampo per basi
Pour on the base-tray
Auf den Sockelträger gießen
Couler dans le porte-socles
Vaciar en el portazocalado

4

45'

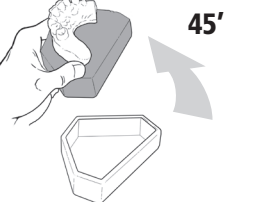

Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

*testato in conformità alla ISO 6873 - *test complies with ISO 6873 - *test conforme à la norme ISO 6873 - *la prueba cumple con la norma ISO 6873 - *Der Test erfüllt die Norm ISO 6873 - IT_I tempi indicati possono variare in base alla temperatura ambientale e alla tecnica di miscelazione. - EN_The times indicated may vary according to room temperature and mixing technique.

DE_Die angegebenen Zeiten können je nach Umgebungstemperatur und Anmischverfahren abweichen. - FR_Les temps indiqués peuvent varier en fonction de la température ambiante et de la technique de mélange. - ES_Tiempos indicativos sujetos a variación según la temperatura ambiente y la técnica de mezcla.

IT_Gesso per uso dentale. Il prodotto è sensibile all'umidità, conservare in luogo asciutto. EN_Dental stone. This product is humidity-sensitive, store in a dry place. FR_Plâtre à usage dentaire. Le produit est sensible à l'humidité et doit être conservé dans un environnement sec. ES_Yeso de uso dental. Producto sensible a la humedad: conservarlo en lugar seco. DE_Gips für den dentalen Gebrauch. Das Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich, an einem trockenen Ort aufbewahren.